

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

音波振動式歯ブラシ

BD-2755 取扱説明書

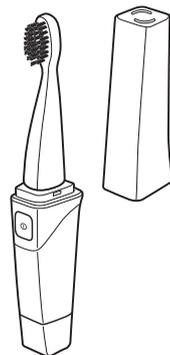

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

● もくじ

| | |
|------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1・2 |
| 各部の名称とはたらき | 3 |
| 電池の入れかた | 4 |
| 使いかた | 5~7 |
| お手入れ | 8 |
| 消耗品について | 9 |
| こんなときは | |
| アフターサービス | 10 |
| 仕 様 | |

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

 **注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

    は、してはいけない「禁止」の内容です。

  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

電池について

警告

〔アルカリ電池について〕

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて目に入ったり、発熱、破裂の原因になります。
- (2) 万一アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意

下記のことを守ってください。電池の使いかたを間違えますと、液もれや発熱・破裂などのおそれがあり、故障やけが、周囲汚損の原因になります。電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。

- (1) ⊕プラス ⊖マイナスを間違えないように正しく入れてください。
- (2) 電池に直接ハンダ付けをしないでください。
- (3) 長い間(2週間以上) お使いにならない場合は、電池をはずしておいてください。
- (4) 単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。また、使用推奨期限内の電池を使用してください。
- (5) 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- (6) 電池を交換するときは電池と端子の汚れを落としてから入れてください。
- (7) 充電式の電池は使用しないでください。

本体について

警告



直射日光の当たるところや自動車内、熱器具の近くに放置しないでください。

変形・変色・故障の原因になります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

けがや故障の原因になります。



幼児の手の届くところに置かないでください。

取りはずしのできる部品の誤飲などによる事故・トラブル・けがの原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えないでください。

けがや故障の原因になります。



スイッチを「入」にしたまま放置しないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。

注意



ヤニ取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤は使用しないでください。

故障の原因になります。



次のことを守ってご使用ください。

歯や歯ぐきを傷める原因になります。

- ・歯周病がひどい人などは、医師にご相談のうえ、ご使用ください。
- ・歯や歯ぐきに歯ブラシを強くあてたり、あて続けしないでください。
- ・治療中の歯や不安定な入れ歯など口内に気になる症状がある場合は、使用しないでください。
- ・乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しないでください。



水の中に沈めたり、放置しないでください。


故障の原因になります。



整髪料や育毛剤、ハンドクリームなどがつかないようにしてください。

故障や外観を損なうおそれがあります。


各部の名称とはたらき

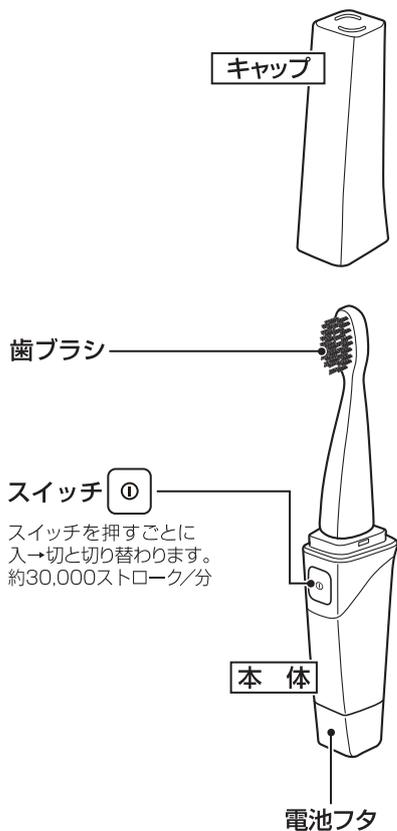

3

〈キャップの取付けかた・はずしかた〉

！キャップ内側の凹部と本体の凸部を合わせて、まっすぐ取付けてください。取りはずすときは、ねじらすにまっすぐ引き抜いてください。

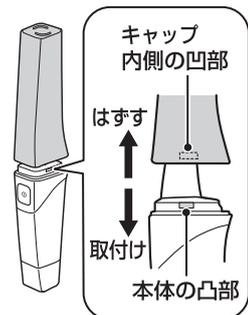


〈歯ブラシの交換について〉

歯ブラシの毛先がひろがってきたら交換してください。毛先がひろがった歯ブラシでは効果的なブラッシングができません。

〈本体の置きかた〉

本体のスイッチ部を上にして置きます。歯ブラシを接地面につけずに、安定して置くことができます。

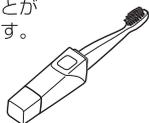


電池の入れかた

電池は付属しておりません。市販の単4形アルカリ乾電池(LR03)1本をお買い求めください。

△注意

- 必ず単4形アルカリ乾電池(LR03)を使用してください。他の電池ではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- 電池残量が少なくなると振動が小さくなり、磨き感が弱くなります。新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
- 電池を入れるときは、必ず本体をよくふきとり水滴が内部に入らないようにしてください。
- 充電式の電池は使用しないでください。

1. 電池フタをはずします。

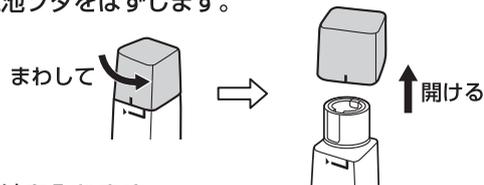

2. 電池を入れます。




単4形アルカリ乾電池(LR03)の⊖側から本体に入れます。

△注意

電池の入れかたを間違えると動きません。


3. 電池フタを取付けます。

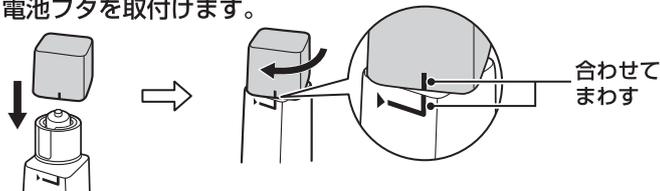

4

使いかた

1. キャップをはずします。

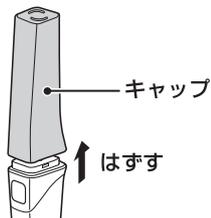

2. 歯ブラシがしっかり固定されているか確認します。




歯ブラシの取りはずしかた



歯ブラシの取付けかた



3. 口の中に歯ブラシを入れてからスイッチを入れます。

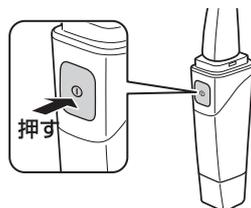

お願い

- 歯みがき剤をご使用の場合は、飛び散りを防ぐために、必ず動作させる前に歯ブラシを口の中に入れてください。
- スイッチはしっかりと押し込んでください。

4. 歯をみがきます。



お願い

- 手磨きをするように、歯ブラシを動かして磨きます。
- 歯ブラシをあてるだけでは十分歯垢を除去できません。
- 歯や歯ぐきに歯ブラシを強くあてすぎないでください。

5. みがき終わったら、歯ブラシを口の中に入れてそのままスイッチを切ります。

お願い

- 飛び散りを防ぐために、必ず口の中で動作を止めてください。
- みがき終わったあと、本体と歯ブラシの間にだ液や水が入ることがありますので、歯ブラシをはずし、水洗いをして、水気をとってください。

お手入れ


歯ブラシのあてかた

〈歯と歯ぐきのさかい目〉

1. 歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきのさかい目に約45度の角度で、3～5秒、歯ぐきに痛みを感じない程度に軽く当てます。




2. 2～3本ごとにすべての内側・外側の歯と歯ぐきのさかい目をみがきます。

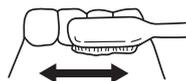


〈歯の内側・外側の表面、奥歯のかみ合わせ部〉

1. 歯ブラシの毛先を歯の表面に直角に約3～5秒間軽く当てます。

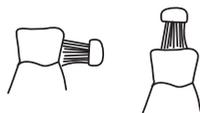

2. 2～3本ごとにすべての歯の表面をみがきます。

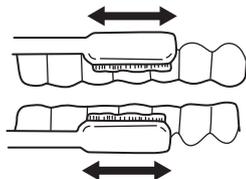

お願い

上の歯と下の歯は別々にみがいてください。



- 汚れは台所用洗剤をうすめ、布に浸してよくしぼってからふき、その後乾いた布でふきとってください。
- シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。


〈歯ブラシを洗う〉



- 水洗いをします。
- 40℃以上のお湯で洗わないでください。
 - 歯ブラシの毛を強く引っぱらないでください。(抜ける原因になります。)
 - 水洗い後はよく水気を取ってください。


〈本体を洗う〉

！電池フタがしっかり閉まっていることを確認してください。

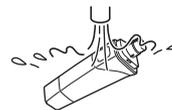

- 水洗いをします。
- 水洗い後は、乾いたタオルなどで水気を十分にふき取ってください。
 - 40℃以上のお湯で洗わないでください。
 - 本体を水の中に放置しないでください。(内部に水が入り、故障の原因になります。)

〈キャップを洗う〉

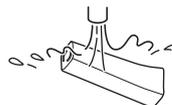

- 水洗いをします。
- キャップ内側に汚れが付着する場合があります。定期的にキャップの内側も洗ってください。
 - 水洗い後は、乾いたタオルなどで水気を十分にふき取ってください。
 - 40℃以上のお湯で洗わないでください。

〈保管について〉

水洗い後は、乾いたタオルなどで水気を十分にふき取ってください。濡れたままポーチやかばんに入れると、キャップをしても濡れたり、汚れたり、傷む原因になります。

△注意

直射日光の当たるところや自動車内、熱器具の近くに放置しないでください。変形・変色・故障の原因になります。

消耗品について

歯ブラシは消耗品です。
お求めは、「お客様サービス係」までご相談ください。

| 製品番号 | 製品名 | 価格 |  |
|---------|--------------|----------|---|
| BD-SP28 | 交換用歯ブラシ2本セット | 500円(税抜) | |

〈交換の目安〉歯ブラシの毛先がひろがってきたら交換してください。
毛先がひろがった歯ブラシでは、効果的なブラッシングができません。

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 ツインバード工業(株)「お客様サービス係」
消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。
• お支払い金額は消費税を含んだ価格となります。(小数点以下は四捨五入となります。)

こんなときは

| こんなときは | 調べるところ | 処 置 |
|-----------|------------------------|--|
| 動かない | 電池の入れかたを間違えていませんか？ | ⊕側 ⊖側を確認し、入れ直してください。 |
| | 電池が消耗していませんか？ | 新しいアルカリ乾電池と交換してください。 |
| | スイッチをしっかりと押し込んでいますか？ | スイッチをしっかりと押し込んでください。 |
| 歯みがきの力が弱い | 電池が消耗していませんか？ | 新しいアルカリ乾電池と交換してください。 (アルカリ乾電池専用です。) |
| | アルカリ乾電池以外の電池を入れていませんか？ | |

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入を正確かつ明瞭に、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電池を抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

● 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- この音波振動式歯ブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------------|
| 技術料 | 故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 電 源 方 式 | DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03)1本(電池別売) |
| ブラシのストローク数(約) | 30,000ストローク/分 |
| 使 用 時 間(約) | 180分 |
| 製 品 寸 法(約) | 幅20×奥行29×高さ157mm |
| 製 品 質 量(約) | 40g(電池含まず) |
| セ ッ ト 内 容 | 本体…1、取扱説明書(保証書付)…1、お申込みハガキ…1 |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用の音波振動式歯ブラシの点検を!

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか。

- 電池から液漏れしている。● いつもより電池が熱くなっている。
- 電池の端子部にさびが発生している。

ご使用中

故障や事故防止のため、使用を中止し、電池をはずし、必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。