

感動をデザインします

TWINBIRD


pd版

シートマッサージャー

BM-2527

BM-2537

取扱説明書

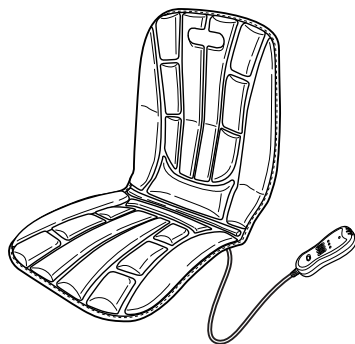

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0602C

2006年 3月 20日新様式(第 1版)

● も く じ

安全上のご注意	1・2
特 長	
効能・効果	3
各部の名称	
使いかた	4
マッサージの使用例	5
こんなときは	
お手入れ	
アフターサービス	6
仕 様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告



医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談の上ご使用ください。事故や体調不良をおこす恐れがあります。

ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み形医用電気機器を使用している人
悪性腫瘍のある人 心臓に障害のある人
生理中の人や妊娠中または出産直後の人
糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
マッサージする部位の創傷や、疾患から生じるむくみや疼痛のある人
安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
病気などで熱の高い人 (38℃以上)
・急性炎症症状 [倦怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期 ・衰弱しているとき
骨折しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人
血栓症や重度の動脈瘤、急性静脈瘤などの血栓障害や各種皮膚炎および皮膚感染症
などで医師からマッサージを禁じられている人
高血圧と診断されている人 上記以外に身体に特に異常を感じているとき



本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。事故や故障の原因になります。



本製品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門科に相談してください。



幼児や子供に使用させたり、本製品の上で遊ばせたりしないでください。事故やけがの恐れがあります。



タバコをすいながらの使用はしないでください。事故の原因になります。



交流 100V 以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショート、発火、故障の原因になります。



風呂上がり直後や、スポーツなど、身体が濡れたままの状態では、絶対に使用しないでください。事故や故障の原因になります。



分解や修理・改造は行わないでください。発火や感電、けがの原因になります。修理はお買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



マッサージ以外の用途に使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。



自分で意思表示ができない人、または、自分で操作できない人への使用はおやめください。体調不良を起こしたり、けがをする恐れがあります。



施療前に本体カバーの破れのないことを確認してください。はずれた状態・破れた状態や内部構造が露出した状態では使用しないでください。直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼してください。けがや感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ストーブなどの熱いものの近くや、布団や電気毛布、コタツの中では使用しないでください。火災や故障の原因になります。

注意



マッサージは 1回 10分以内にしてください。また、同一箇所への使用は 5分以内にしてください。長時間の使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。



頭、おなか、肘、ひざなどの関節部には使用しないでください。また、うつ伏せでの使用はしないでください。事故やけがの原因になります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。感電やショート、発火の原因になります。



お手入れの際は、本体を停止させ必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因になります。



使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。守らないと事故や体調不良をおこす恐れがあります。



停電のときは直ちに電源スイッチを「切」の位置に戻し、電源プラグをコンセントから抜いてください。停電から復帰したときに事故やけがの恐れがあります。



使用後は、電源スイッチを「切」の位置に戻した後、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。また、水や湯をかけないでください。感電や故障の原因になります。



他の治療器と同時に使用しないでください。体調不良の原因になります。



落としたり、踏んだり等の強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因になります。



電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。感電・ショート、発火の原因になります。



スイッチを入れて正常に動作することを確認してから使用してください。身体にあてて急に動かすと、けがの原因になります。



直射日光のあたる場所や、重いものをのせたままで放置しないでください。色あせ、変形、劣化、故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず ACアダプター本体を持って引き抜いてください。感電やショート、発火の原因になります。



使用中に眠ったりしないでください。また、飲酒後の使用はしないでください。事故やけがの恐れがあります。



本体の上で飛びはねたり、立ちながらの使用はしないでください。事故やけが、故障の原因になります。



動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。感電や発火の原因になります。



固定用バンドはいつの背もたれにしっかりと固定してください。けがの原因になります。



テレビやラジオの付近では使用しないでください。ノイズの入る場合があります。



本体を二つ折り以上、無理に折り畳んだり、丸めたりしないでください。事故や故障の原因になります。



本体を折り畳んだまま使用しないでください。事故や故障の原因になります。



お年寄りや虚弱体質の人が使用する場合、始めは使用時間を短くしてください。体調不良の原因になります。

お願い

本製品を廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従ってください。

特 長


- 座椅子やソファーなどにセットして座ったままマッサージすることができます。
- ベッドの上や床に敷いて横になったままマッサージすることができます。
- 約 10分で自動停止する、オートオフタイマーを内蔵しています。

効能・効果

あんま・マッサージの代用

- 疲労の回復
- 血行の促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

各部の名称

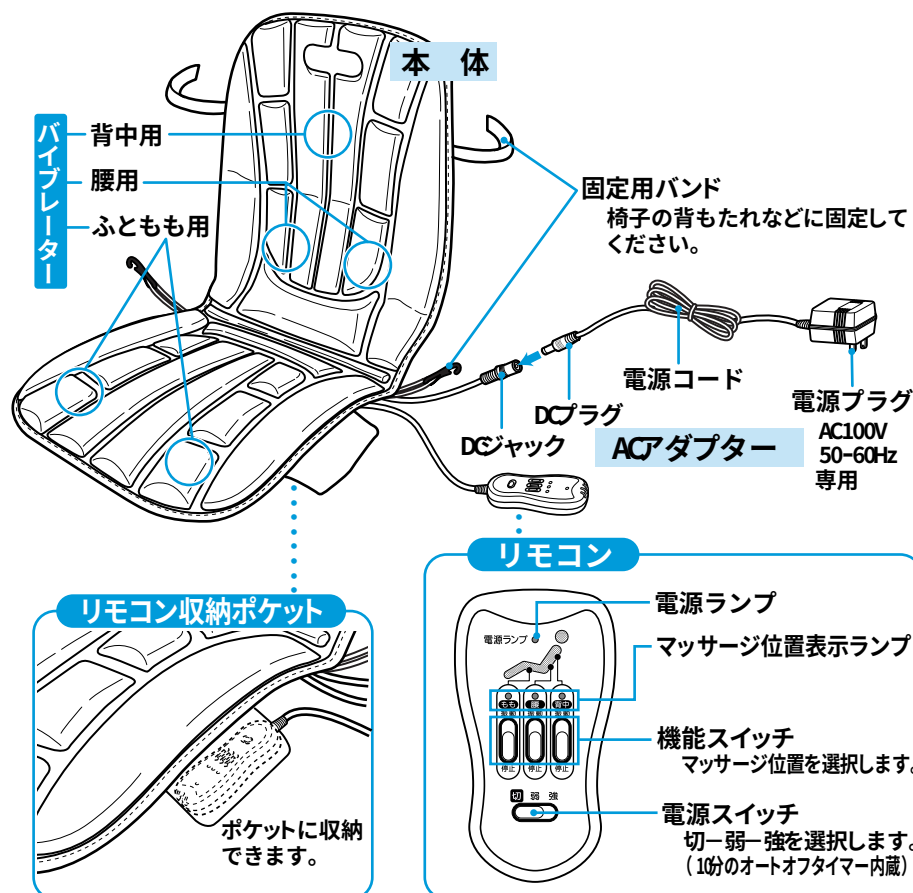

使いかた

1. 使用する場所を決めます。


本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。事故や故障の原因になります。

- 本体は安定した場所に設置してください。
- 椅子でご使用の場合は、必ず固定用バンドでしっかりと固定してください。
- テレビ、ラジオなどのAV機器から離れた場所でご使用ください。
- 雑音が入ることがあります。
- キャスター付椅子や回転椅子でのご使用は避けてください。
- 電源コードに無理な力が加わり断線の恐れがあります。




固定用バンド

2. ACアダプターのDCプラグを本体のジャックにしっかりと差し込み、ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

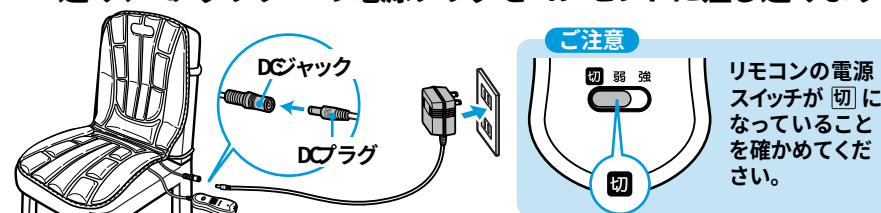


3. マッサージをします。


- ① 電源スイッチを弱にします。
- ② マッサージしたい箇所の機能スイッチを「振動」にします。
- ③ お好みで、電源スイッチで「弱」↔「強」を選択してください。

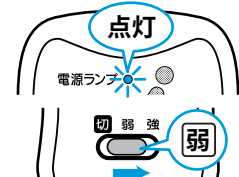

電源ランプが点灯します。使いはじめは「弱」からご使用ください。

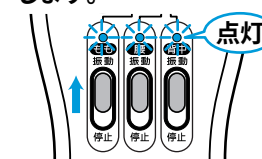



選んだ部位のマッサージ位置表示ランプが点灯し、振動が始まります。

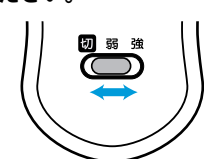

動作開始から約 10分で自動的に停止します。(内蔵オートオフタイマーによる)

4. 使い終わったら…

- ① 機能スイッチを全て「停止」位置に戻し、電源スイッチを「切」にします。
- ② ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、本体のDCジャックからDCプラグをはずします。

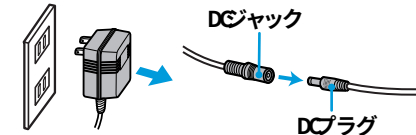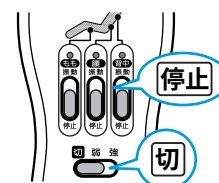

マッサージの使用例

椅子での使用



ベッドや布団での使用



ご注意とお願い

- 眠りながらのご使用は避けてください。体調不良やけがの原因になります。
- 椅子の形状によっては、パイプレーターが当たりにくい場合があります。その場合には、椅子と本体との間に厚手のタオル等をしいて調整してください。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処 置
動かない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
	電源スイッチが「切」になっていませんか？	電源スイッチを「弱／強」にしてから機能スイッチを振動にします。
	電源コードが傷んでいませんか？	ただちに使用を中止し、当社「お客様サービス係」まで修理をご依頼ください。
使用中に停止した。	スイッチを入れてから約10分経過していませんか？	オートオフタイマーによって自動停止しています。再度、使用するときは、電源スイッチを入れ直してください。
破損してしまったり、一部のパイプレーターが動かない。		ただちに使用を中止し、当社「お客様サービス係」まで修理をご依頼ください。

★長年ご使用の電気器具の点検を！

愛情点検 	ご使用の際 このようことはありませんか？ ●電気コードや電源プラグが異常に熱い。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。●自動的に切れないときがある。●その他の異常・故障がある。	ご使用中 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをする恐れがあります。

- 水でうすめた食器用中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼって拭き、その後乾いた布で拭き取ります。
※本体に水などが付着しないようにしてください。
- シンナーやベンジン、スプレー式クリーナー類は絶対使用しないでください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよく読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このシートマッサージャーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 337- 455
FAX (0256) 93- 1077
お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

販 売 名	シートマッサージャー	
	本 体	DC12V(専用 ACアダプター BM-GH2型)
電 源	ACアダプター	AC100V 50/ 60Hz
消 費 電 力	8W	
定 格 時 間	10分	
タ イ マ ー	10分	
類 別	器具器械 (7) パイプレーター	
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器	
輸 入 販 売 業 者	ツインバード工業株式会社 新潟県燕市吉田西太田 2084-2	
医 療 用 具 許 可 番 号	15BY0004	
本 体 外 被 材 質	ポリエステル	
内 部 クッション 材 質	ウレタンスポンジ	
コードの長さ (ACアダプター)	約 2.9m	
本 体 寸 法	約 幅 470mm×奥行き 50mm×高さ 900mm	
本 体 質 量 (重量)	約 1.3kg(ACアダプターを含む)	