


感動をデザインします

**TWINBIRD**

pd版

シートマッサージャー S  
**EM-2535**  
**取扱説明書**

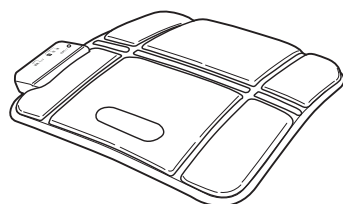

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
特長	
効能・効果	3
各部の名称	
使いかた	4
マッサージの使用例	
こんなときは	5
お手入れ	
アフターサービス	6
仕様	

RX0404A

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 危険



下記のような医用電子機器との併用は、絶対にしていただき。  
 (1)ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器 (2)人工心肺等の生命維持用電子機器  
 (3)心電計等の装着型医用電子機器 医用電子機器の誤動作を招く恐れがあります。

## 警告



次の人は、ご使用前に必ず医師と相談してください。事故や体調不良を起こす原因になります。  
 医師の治療を受けている人や特に身体に異常を感じている人  
 悪性腫瘍のある人 心臓に障害のある人  
 生理中や妊娠している人 安静を必要とする人  
 背骨に異常のある人や曲がっている人  
 かつて治療を受けたところ、または疾患部への使用  
 熱の高い人 知覚障害のある人  
 体力の衰えた人 急性疾患の人  
 骨の弱い人(骨粗しょう症など)



本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。  
 事故や故障の原因になります。



カバーが破れたり、内部が露出した状態では使用しないでください。  
 事故やけがの原因になります。



お買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。



本体の上で飛びはねたり、立ちながらの使用はしないでください。  
 事故やけが、故障の原因になります。



タバコをすいながらの使用はしないでください。  
 事故、けがの原因になります。



交流 100V以外では使用しないでください。  
 火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
 感電やショート、発火、故障の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。  
 感電やけがをすることがあります。



テレビやラジオの付近では使用しないでください。  
 ノイズの入る場合があります。



頭部や胸部、腹部、骨盤ひじ・ひざ・足の甲などへの使用はしないでください。  
 事故やけがの原因になります。



風呂上がり直後や、スポーツなど、身体が濡れたままの状態では、絶対に使用しないでください。  
 事故や故障の原因になります。



分解や修理・改造は行わないでください。発火や感電、けがの原因になります。修理はお買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。  
 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



本体は二つに折ってご使用になれますが、それ以上無理に折り畳んだり、丸めたりしないでください。  
 事故や故障の原因になります。



他の治療器と併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこす恐れがあります。

## 注意



幼児に使用しないでください。また、使用中は幼児を近づけないでください。  
 事故やけがの原因になります。



マッサージ以外の目的では使用しないでください。  
 故障や事故の原因になります。



1回の使用は10分以内にしてください。長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。



スイッチを入れて正常に動作することを確かめてから使用してください。身体にあててから急に動かすと、けがの原因になります。



使用中に気分が悪くなったり身体に異常があらわれたり皮膚にかぶれなどを生じたりする場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。  
 事故や体調不良の原因になります。



自分で意思表示ができない人や身体の不自由な方には使用させないでください。  
 事故やけがの原因になります。



お年寄りや虚弱体質の人が使用する場合、始めは使用時間を短くしてください。  
 体調不良の原因になります。



ストーブなどの熱いものの近くや、布団や電気毛布、コタツの中では使用しないでください。  
 火災や故障の原因になります。



浴室など湿気の多い場所で使わないでください。また、水や湯をかけないでください。  
 感電や故障の原因になります。



落としたり、踏んだり等の強い衝撃を与えないでください。  
 けがや故障の原因になります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。  
 感電やショート、発火の原因になります。



使用後は、電源スイッチを「切」の位置に戻した後、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。  
 感電やショート、発火の原因になります。



停電のときは直ちに電源スイッチを「切」の位置に戻し、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
 復帰したときに危険です。



動かなくなったり、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検・修理をご依頼ください。  
 感電や発火の原因になります。



直射日光のあたる場所や、重いものをのせたままで放置しないでください。  
 色あせ、変形、劣化、故障の原因になります。



固定用バンドはイスの背もたれにしっかりと固定してください。  
 けがの原因になります。

## お願い

廃棄方法は、お住まいの市区町村の方法に従ってください。

# 特長

座椅子やソファなどにセットして座ったままマッサージすることができます。ベッドの上や床に置いて横になったままマッサージすることができます。約10分で自動停止する、オートオフタイマーを内蔵しています。

# 効能・効果

あんま・マッサージの代用

疲労の回復 血行の促進 筋肉の疲れをとる  
 筋肉のこりをほぐす 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

# 各部の名称

## コントローラー

電源スイッチ

切・弱・強を選択します。(10分のオートオフタイマー内蔵)

機能スイッチ

連続とウェーブ(間欠)の動作を切替えます。



連続 ウェーブ 切 弱 強

電源ランプ

電源ランプ

点灯：連続動作時

点滅：ウェーブ動作時

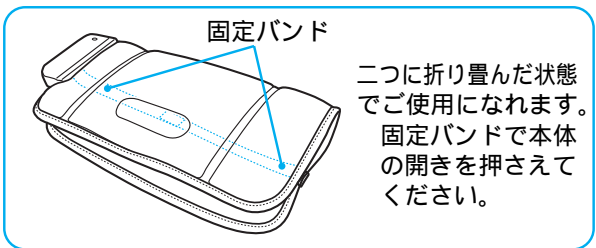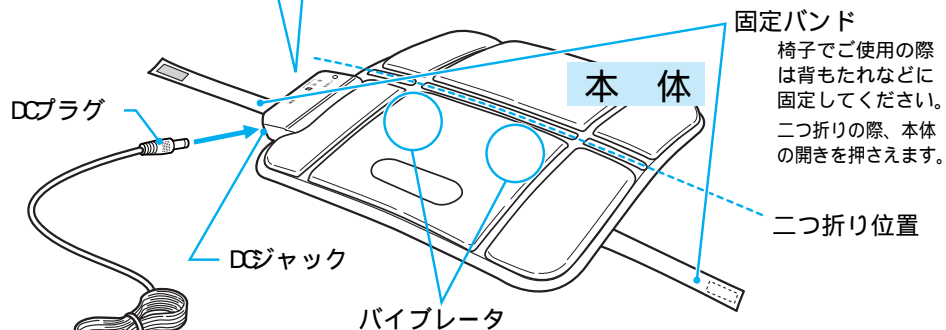

電源コード

電源プラグ

AC100V 50-60Hz専用

ACアダプター

# 使いかた

## 1.使用する場所を決めます。

本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。事故や故障の原因になります。

本体は安定した場所に設置してください。椅子の背もたれでご使用の場合は、本体の倒れ込み防止のため固定用バンドでしっかりと固定してください。(椅子の形状によってはバンドを取付けられない場合があります。)




固定用バンド


テレビ、ラジオなどのAV機器からは離れた場所でご使用ください。雑音が入ることがあります。使用中にテレビ、パソコン等の画面を見たり本を読まないでください。気分の悪くなる場合があります。

キャスター付椅子や回転椅子でのご使用は避けてください。電源コードに無理な力が加わり断線の恐れがあります。

## 2.ACアダプターのDCプラグを本体のジャックにしっかりと差し込み、ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

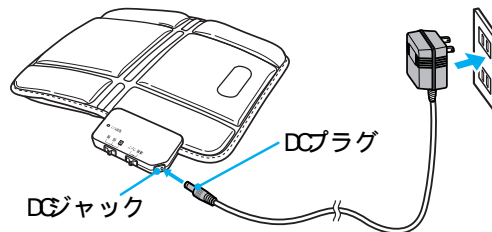


ご注意

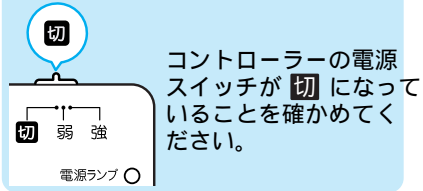


## 3.マッサージをします。

電源スイッチを「弱」にします。

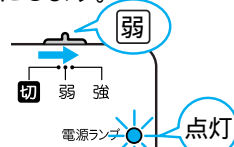

電源ランプが点灯します。使いはじめは「弱」からご使用ください。

お好みに合わせて機能スイッチを選択します。

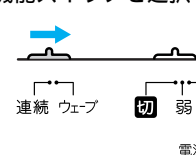


お好みに、電源スイッチの「弱」または「強」を選択してください。




動作開始から約10分で自動的に停止します。(内蔵オートオフタイマーによる)

## 4.使い終わったら...

電源スイッチを「切」にします。

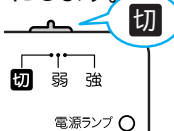

ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、本体のDCジャックからDCプラグをはずします。

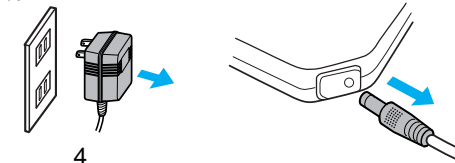


# マッサージの使用例

## 椅子での使用



## ベッドや布団での使用

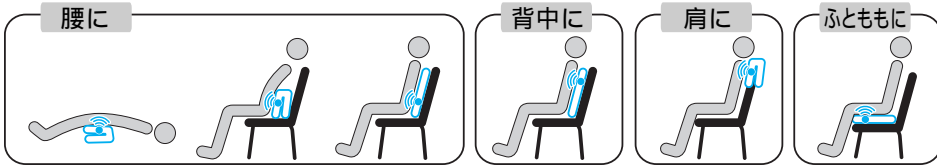

眠りながらのご使用は避けてください。体調不良やけがの原因になります。椅子の形状によっては、パイプレーターが当たりにくい場合があります。その場合には、椅子と本体との間に厚手のタオル等をしいたり、本体の位置を動かして調整してください。

# こんなときは

こんなときは?	調べる ところ	処 置
動かない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
	電源スイッチが「切」になっていませんか?	電源スイッチを「弱」または「強」にします。
	電源コードが傷んでいませんか?	ただちに使用を中止し、当社「お客様サービス係」まで修理をご依頼ください。
使用中に停止した。	スイッチを入れてから約10分経過していませんか?	オートオフタイマーによって自動停止しています。再度、使用するときは、電源スイッチを入れ直してください。
破損してしまったり、一部のパイプレーターが動かない。		ただちに使用を中止し、当社「お客様サービス係」まで修理をご依頼ください。

# お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをする恐れがあります。

水でうすめた食器用中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼって拭き、その後乾いた布で拭き取ります。

本体に水などが付着しないようにしてください。シンナーやベンジン、スプレー式クリーナー類は絶対に使用しないでください。洗濯はできません。

# アフターサービス

## 1.保証書

裏表紙に添付しています。保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

## 3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。保証期間中の修理保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4.補修用性能部品の最低保有期間

シートマッサージャーSの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 5年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455

FAX ( 0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前時~午後5時

〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕様

販 売 名	シートマッサージャーS	
電 源	本 体	DC12V(専用ACアダプター EM-GH3型)
	ACアダプター	AC100V 50/ 60Hz
消 費 電 力	3W	
定 格 時 間	10分	
タ イ マ ー	約10分	
類 別	器具器械(77)パイプレーター	
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器	
医療用具許可番号	15BY0004	
輸 入 販 売 業 者	ツインバード工業株式会社 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田 2084-2	
本 体 寸 法	約 幅 450mm× 奥行 50mm× 高さ 440mm	
本 体 質 量(重 量)	約 650g( ACアダプター含む)	
コードの長さ( ACアダプター)	約 2.5m	
本 体 外 被 材 料	ポリエステル	
内部のクッション材質	ウレタンスポンジ	

## 長年ご使用の電気器具の点検を!

### 愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか。

電気コードや電源プラグが異常に熱い。コードを折り曲げると通電したり、しなかったり、いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。製品に触れるとビリビリと電気を感じる。自動的に切れないときがある。その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。