

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用 添付文書

ホットシートマッサージャー

EM-2538 取扱説明書

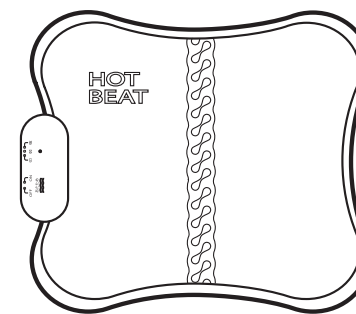

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なお読みにください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1609B

2016年9月18日(新様式第1版)

● もくじ

安全上のご注意……………1・2

特 長

使用目的、効能・効果……………3

各部の名称

使いかた……………4

マッサージの使用例

こんなときは……………5

お手入れと保管

アフターサービス……………6

仕 様

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

特 長

- 座椅子やソファーなどにセットして座ったままマッサージすることができます。
- ベッドの上や床に置いて横になったままマッサージすることができます。
- 固定ベルトを使用し、ふくらはぎに巻き付けてマッサージすることができます。
- 約10分で自動停止する、オートオフタイマーを内蔵しています。

使用目的、効能・効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労の回復 ● 血行の促進 ● 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

各部の名称

コントローラー

電源スイッチ

バイブレーターの「切」、「弱」、「強」を選択します。
(10分のオートオフタイマー内蔵)

あたためスイッチ

ヒーターの「ON」、「OFF」を選択します。
※ヒーターはバイブレーター作動時のみ動作します。

電源ランプ

バイブレーター作動時に点灯します。

あたためランプ

あたため「ON」時に点灯します。

本 体

ヒーター

※ヒーターは、バイブレーター作動時のみ動作します。
ヒーター単独では使用できません。

DCプラグ

電源コード

DCジャック

バイブレーター

固定バンド

本体裏面の固定バンドを使用し、ふくらはぎに巻き付けてご使用になれます。

電源プラグ

AC100V 50/60Hz専用

ACアダプター

付属の専用ACアダプター
EM-CH80型をご使用ください。

ご注意

ストッキングを着用した状態でふくらはぎに使用する際は、面ファスナーによる伝線にご注意ください。

使いかた

1.使用する場所を決めます。

⚠警告



本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。
事故や故障の原因になります。

- 本体は安定した場所に設置してください。
ふくらはぎに巻き付けてご使用の場合は、固定バンドでしっかりと固定してください。

ふくらはぎへの巻き付けかた

※ご使用後は、元通りに固定バンドを本体裏面に固定してください。

- ① 本体の裏面から固定バンド先端の面ファスナーをはずします。
- ② 本体の表面(面ファスナーの無い面)を内側にして、ふくらはぎに当てます。
- ③ 固定バンドを足の前側に回し、先端の面ファスナーを、本体裏面の面ファスナーにしっかりと固定します。

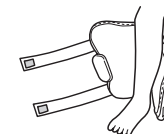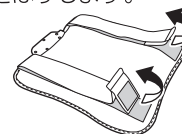

- テレビ、ラジオなどのAV機器から離れた場所でご使用ください。
雑音が入ることがあります。
- 使用中にテレビ、パソコンなどの画面を見たり本を読まないでください。
気分が悪くなる場合があります。
- キャスター付椅子や回転椅子でのご使用は避けてください。
電源コードに無理な力が加わり断線の恐れがあります。

2.ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックにしっかりと差し込み、ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。



ご注意

切

コントローラーの電源スイッチが「切」になっていることを確かめてください。

3.マッサージをします。

- ① 電源スイッチを「弱」にします。




電源ランプが点灯します。
使いはじめは「弱」からご使用ください。

- ② あたためスイッチを操作して、ヒーターの「ON」「OFF」を切換えます。



あたため「ON」時は、あたためランプが点灯します。

- ③ 電源スイッチを操作して、「弱」または「強」を選択します。

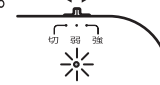

動作開始から約10分で自動的に停止します。
(オートオフ機能)

4.使い終わったら

- ① 電源スイッチを「切」にします。



- ② ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、本体のDCジャックからDCプラグをはずします。

