

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

**家庭用 添付文書**

タタキ&振動フットマッサージャー  
**EM-2563  
取扱説明書**

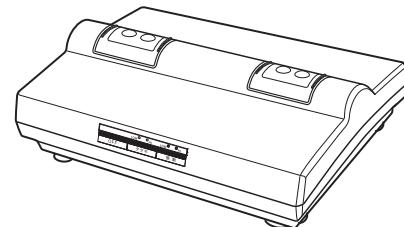

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。

RX1101C

2011年1月18日(新様式第1版)

●もくじ

安全上のご注意	1・2
使用目的、効能・効果	3
各部の名称	
使いかた	4~6
お手入れと保管	7
こんなときは	
アフターサービス	8
仕様	

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、  
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)を  
よく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

**警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 警告



医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談の上ご使用ください。  
事故や体調不良をおこす恐れがあります。  
(1)ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人  
(2)悪性腫瘍のある人 (3)心臓に障害のある人 (4)生理中の人や妊娠中または出産直後の  
(5)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人  
(6)マッサージする部位の創傷や、疾患から生じるむくみや疼痛のある人  
(7)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき  
(8)病気などで熱の高い人(38℃以上)  
・急性炎症症状「倦怠感、悪寒、血压変動など」の強い時期・衰弱しているとき  
(9)骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人  
(10)高血圧と診断されている人 (11)上記以外に身体に特に異常を感じているとき



医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症  
〔皮下組織の炎症を含む〕など。  
症状を悪化させる恐れがあります。



本製品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。



本製品は足用のマッサージ器です。  
足以外の部位へは使用しないでください。  
また、マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの恐れがあります。



自分で意思表示のできない人、または、自分で操作できない人への使用はおやめください。  
体調不良を起こしたり、けがをする恐れがあります。



必ず交流100Vで使用してください。  
(海外でのご使用や変圧器を用いたご使用はできません。)

火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、  
コンセントの差し込みがゆるいときは  
使用しないでください。

感電やショート、発火、故障の原因になります。  
電源コードが破損した場合、危険ですのでコードの交換はお買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



絶対に分解・修理・改造は行わないでください。  
発火・感電・けがの原因になります。  
修理はお買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

分解禁止



使用中に身体に異常があらわれたり、  
感じたときには直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

守らないと事故や体調不良をおこす恐れがあります。



幼児や子供に使用させたり、本製品の上で遊ばせたりしないでください。  
事故やけがの恐れがあります。



施療前に本体に損傷のないことを確認してください。  
損傷した状態や内部構造が露出した状態では使用しないでください。

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼してください。けがや感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、  
加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。  
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ストーブなどの熱いものの近くや、布団や電気毛布、コタツの中では使用しないでください。

火災や故障の原因になります。

## 注意



マッサージは1回3分以内にしてください。  
長時間の連続使用は逆効果やけがの原因になります。



頭、ひじ、ひざ、腹部には使用しないでください。  
事故やけがの原因になります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。  
感電やショート、発火の原因になります。



お手入れの際は、本体を停止させ必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電やけがの原因になります。



停電のときは直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。  
停電から復帰したときに事故やけがの恐れがあります。



使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。  
また、水や湯をかけないでください。  
感電や故障の原因になります。



同時に2人以上で使用しないでください。  
けがや故障の原因になります。



他の治療器と一緒に使用しないでください。  
体調不良の原因になります。



お年寄りや虚弱体質の人が使用する場合は、椅子などに座って使用してください。  
転倒による事故やけがの恐れがあります。



スイッチを入れて正常に動作することを確かめてから使用してください。  
身体にあてて急に動かすと、けがの原因になります。



電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。  
感電、ショート、発火の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショート、発火の原因になります。



使用中に眠ったりしないでください。  
また、飲酒後の使用はしないでください。  
事故やけがの恐れがあります。



本体の上に座ったり、物をのせたりしないでください。  
事故やけがの恐れがあります。



本体の上に立って使用する場合は、転倒しないように注意してください。  
飛びはねたりしないでください。  
つかまる所のある場所で使用してください。



耐荷重は、100kgまでです。  
100kgを超えてご使用はしないでください。  
故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しや、モード設定／電源スイッチの操作をしないでください。  
感電やけがをする恐れがあります。



動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。  
感電や発火の原因になります。



素足では使用しないでください。  
けがや体調不良の原因になります。



幼児の手の届くところでは、使用しないでください。  
事故やけがの原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えないでください。  
けがや故障の原因になります。

### お願い


- しばらく使用していない場合は、ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、安全に動作することを確認してください。
- 本製品を廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従ってください。

## 使用目的、効能・効果


あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労の回復
- 血行の促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

## 各部の名称

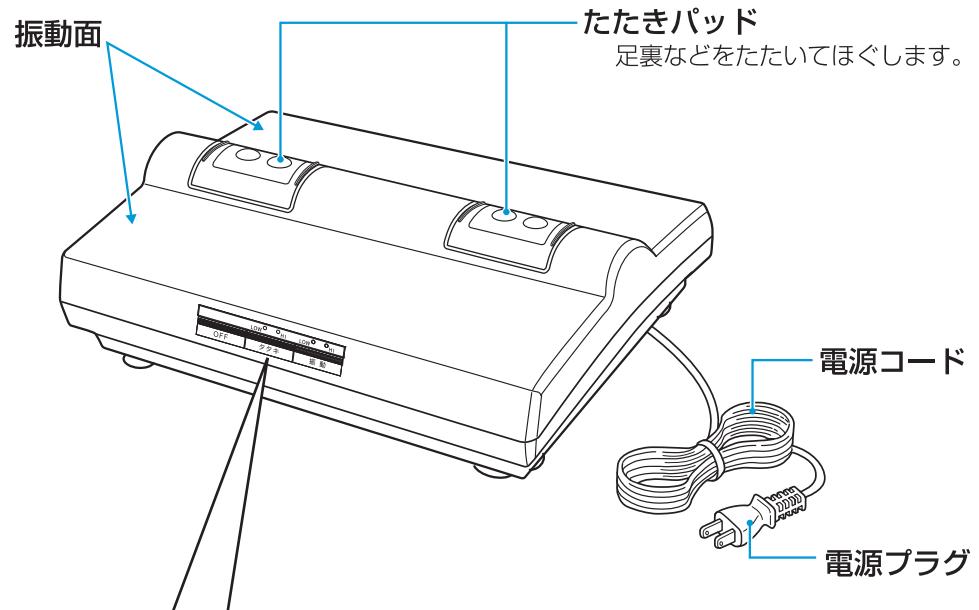


### 操作部

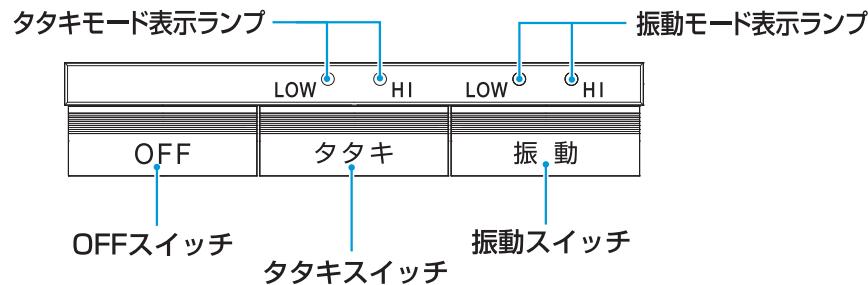

## 使いかた

ご使用中はテレビ等の画面が乱れることがあります。

### 1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

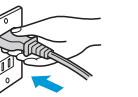

- 安定性のよい場所に設置します。
- スイッチが正常に動作するか確認します。

#### △警告

##### 〈感電や発火の恐れがあります。〉

- 必ず交流100Vで使用してください。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。


##### 〈感電や故障、火災の恐れがあります。〉

- 布団やコタツの中では使用しないでください。


##### 〈事故やけが、故障の恐れがあります。〉

- 本製品は足用のマッサージ器です。足以外の部位には使用しないでください。また、マッサージ以外の用途に使用しないでください。
- 幼児や子供に使わせたり、本体の上で遊ばせないでください。
- 本体が損傷した状態では使用しないでください。
- 使用中や身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 自分で意思表示のできない人、または、自分で操作できない人への使用はおやめください。

### 2. タタキの強さを選びます。

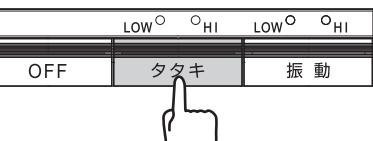


### 3. 振動の強さを選びます。

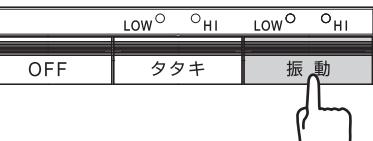

### 4. コリ、疲れの部位にあてます。


#### 立って

本体の上に立って使用することができます。転倒しないようにつかまる所のある場所で使用してください。

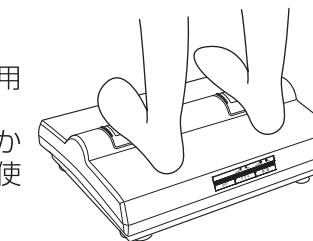

#### 座って

椅子等に座った状態で足をたたきパッドの上にのせてください。

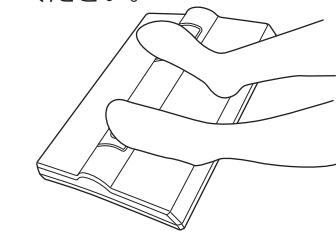

#### △注意

##### 〈感電や発火、故障の恐れがあります。〉

- 動かなくなったり、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検・修理を依頼してください。
- 浴室などの湿気の多い場所や、濡れた足、身体で使用しないでください。
- 定格時間3分以上の連続使用はしないでください。連続でご使用になる場合は、30分程度休ませてからご使用ください。

##### 〈逆効果やけがの恐れがあります。〉

- マッサージは1回3分以内にしてください。  
また、連続使用はお避けください。

#### 動作音についてのお願い

機器の構造と使用環境により、動作音が他人の迷惑になる恐れがありますので、以下の点をご注意の上ご使用ください。

##### 〈隣室の方へのご配慮をお願いします。〉

- 深夜のご使用はお避けください。

##### 〈階下の方へのご配慮をお願いします。〉

- 厚めの座布団などを下に敷いてご使用ください。  
座布団などを敷いた場合、不安定になるため製品の上に立って使用しないでください。

# 使いかた(つづき)


## タイマーについて

使いすぎを防止するタイマーが内蔵されています。  
運転開始から約3分でタイマーがはたらき、動作が停止します。


## 保護装置について

長時間の連続使用や、たたきパッドを強く押しつけすぎたりすることにより、機器の内部温度が上昇すると、保護装置が働きたたき動作が停止します。この場合は、電源プラグをコンセントから抜いて1時間程度休ませてからご使用ください。

## 5.途中で止めたいときは、OFFスイッチを押します。

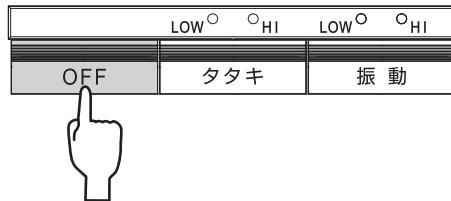

## 6. 使用後は電源プラグをコンセントから抜きます。

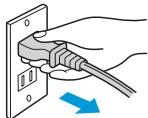

### △注意

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを抜いてください。  
感電やショート、発火の原因になります。

# お手入れと保管

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電や故障の原因になります。
- 水洗いはしないでください。内部に電気部品がありますので事故や故障の原因になります。

## 本体

- 本体のお手入れは、水でうすめた食器用中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼって拭き、その後乾いた布で拭き取ります。
- シンナーやベンジン、スプレー式クリーナー類は絶対使用しないでください。

## 保管のしかた

- 子供の手の届く所に置かないでください。
- 湿度・温度の高いところや直射日光の当たるところに置かないでください。
- 使用後は本体及び付属品の汚れやホコリを取り、湿気の少ないところに保管してください。

## こんなときは

こんなときは?	調べるところ	処置
動かない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。
	スイッチが切れていませんか?	スイッチを入れてください。
	電源コードが傷んでいませんか?	修理を依頼してください。
使用中に停止した	スイッチを入れてから約3分経過していませんか?	内蔵タイマーによって、約3分間で自動的に停止します。 この場合は、スイッチを入れ直してください。
たたき動作が停止した	足等を強く押しつけすぎたり、長時間の連続使用をしていませんか?	使用中に強く押しつけすぎたり、長時間の連続使用により内部の温度が上昇した場合、保護装置が作動し停止します。 この場合、電源プラグを抜いて、1時間程度放置して内部の温度を下げた後、ご使用ください。
破損してしまった		修理を依頼してください。

★長年ご使用のフットマッサージャーの点検を!			
愛情点検 	ご使用の際 このようなことは ありませんか?	●電気コードや電源プラグが異常に熱い。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。 ●いつもより異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。 ●製品に触るとビリビリと電気を感じる。 ●自動的に切れないときがある。 ●その他の異常・故障がある。	ご使用中止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

# アフターサービス

## 1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。  
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このタタキ&振動フットマッサージャーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

### お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕様

販売名	タタキ&振動フットマッサージャー
形名	EM-2563
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	50Hz: 24W / 60Hz: 21W
定格時間	3分
タイマー	3分
耐荷重	100kg
医療機器の分類	管理医療機器
類別	機械器具(77)バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000)
医療機器認証番号	223AGBZX00005000
製造販売業者	株式会社ICST 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー
製造業者	VIGOR ELECTRONICS MANUFACTORY(中国)
本体寸法	約幅355mm×奥行き250mm×高さ100mm
本体質量	約2.5kg

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。