

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用 添付文書

シートマッサージャーS

# EM-2592 取扱説明書

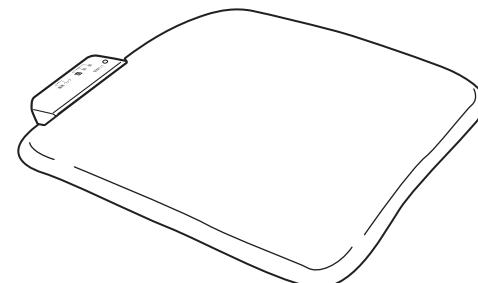

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。

RX1311B  
2013年11月19日(新様式第1版)

● もくじ	
<b>安全上のご注意</b>	1・2
<b>特 長</b>	
<b>使用目的、効能・効果</b>	3
<b>各部の名称</b>	
<b>使いかた</b>	4
<b>マッサージの使用例</b>	5
<b>こんなときは</b>	
<b>お手入れと保管</b>	6・7
<b>アフターサービス</b>	
<b>仕 様</b>	6

保証書付  
保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、  
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)を  
よく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

!**警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

!**注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

( ) は、してはいけない「禁止」の内容です。

( ) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## !**警告**



医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談の上ご使用ください。

事故や体調不良をおこす恐れがあります。

- (1)ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み形医用電気機器を使用している人
- (2)悪性腫瘍のある人
- (3)心臓に障害のある人
- (4)生理中の人が妊娠中または出産直後の人
- (5)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- (6)マッサージする部位の創傷や、疾患から生じるむくみや疼痛のある人
- (7)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
- (8)病気などで熱の高い人(38℃以上)
  - ・急性炎症症状【倦怠感、悪寒、血压変動など】の強い時期・衰弱しているとき
  - (9)骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人
  - (10)背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人
  - (11)高血圧と診断されている人
  - (12)上記以外に身体に特に異常を感じているとき



医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症  
【皮下組織の炎症を含む】など。  
症状を悪化させる恐れがあります。



本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。

事故や故障の原因になります。



本製品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門科に相談してください。



幼児や子供に使用させたり、本製品の上で遊ばせたりしないでください。

事故やけがの恐れがあります。



タバコをすいながらの使用はしないでください。

事故の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電やショート、発火、故障の原因になります。



風呂上がり直後や、スポーツなど、身体が濡れたままの状態では、絶対に使用しないでください。

事故や故障の原因になります。



絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。



修理はお買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの恐れがあります。



自分で意思表示ができない人、または、自分で操作できない人への使用はやめください。

体調不良をおこしたり、けがをする恐れがあります。



施療前に本体カバーの破れのないことを確認してください。

はずれた状態・破れた状態や内部構造が露出した状態では使用しないでください。

直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼してください。

けがや感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ストーブなどの熱いものの近くや、布団や電気毛布、コタツの中では使用しないでください。

火災や故障の原因になります。

## !**注意**



マッサージは1回10分以内にしてください。また、同一箇所への使用は5分以内にしてください。

長時間の使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。



頭、おなか、肘、ひざなどの関節部には使用しないでください。また、うつ伏せでの使用はしないでください。

事故やけがの原因になります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。

感電やショート、発火の原因になります。



お手入れの際は、本体を停止させ必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電やけがの原因になります。



使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

守らないと事故や体調不良をおこす恐れがあります。



停電のときは直ちに電源スイッチを「切」の位置に戻し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

停電から復帰したときに事故やけがの恐れがあります。



使用後は、電源スイッチを「切」の位置に戻した後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。

また、水や湯をかけないでください。

感電や故障の原因になります。



他の治療器と同時に使用しないでください。

体調不良の原因になります。



落としたり、踏んだり等の強い衝撃を与えないでください。

けがや故障の原因になります。

### お願ひ

- しばらく使用していなかった場合は、ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、安全に動作することを確認してください。
- 本製品を廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従ってください。

電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。

感電、ショート、発火の原因になります。

スイッチを入れて正常に動作することを確かめてから使用してください。

身体にあてて急に動かすと、けがの原因になります。

直射日光のある場所や、重いものをのせたままで放置しないでください。

色あせ、変形、劣化、故障の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電やショート、発火の原因になります。

使用中に眠ったりしないでください。

また、飲酒後の使用はしないでください。

事故やけがの恐れがあります。

本体の上で飛びはねたり、立ちちながりの使用はしないでください。

事故やけが、故障の原因になります。

動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。

感電や発火の原因になります。

固定用バンドはいすの背もたれにしっかりと固定してください。

けがの原因になります。

テレビやラジオの付近では使用しないでください。

ノイズの入る場合があります。

本体は二つに折ってご使用になれますが、それ以上無理に折り畳んだり、丸めたりしないでください。

事故や故障の原因になります。

お年寄りや虚弱体質の人が使用する場合、始めは使用時間を短くしてください。

体調不良の原因になります。

# 特長

- 座椅子やソファーなどにセットして座ったままマッサージすることができます。
- ベッドの上や床に置いて横になったままマッサージすることができます。
- 約10分で自動停止する、オートオフタイマーを内蔵しています。




## 使用目的、効能・効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労の回復
- 血行の促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

## 各部の名称

### コントローラー

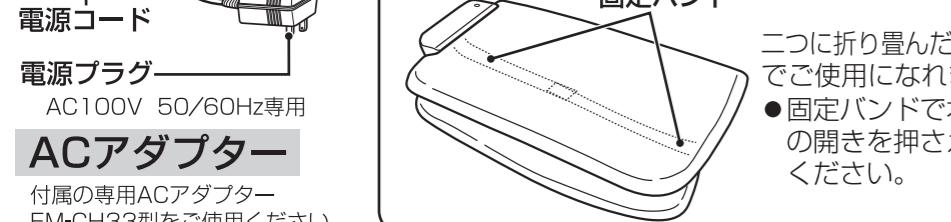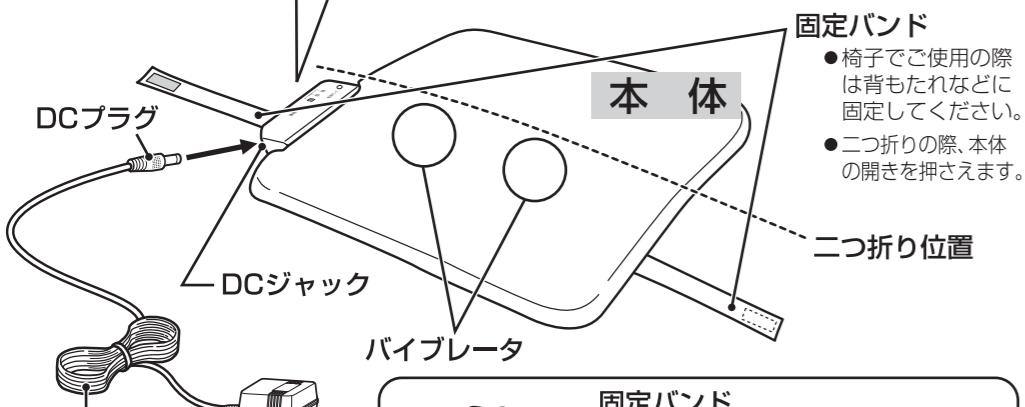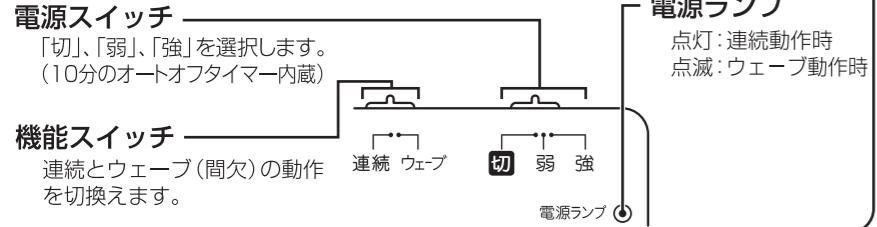


## 使いかた

### 1. 使用する場所を決めます。


本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。  
事故や故障の原因になります。

- 本体は安定した場所に設置してください。  
椅子の背もたれでご使用の場合は、本体の倒れ込み防止のため  
固定用バンドでしっかりと固定してください。  
(椅子の形状によってはバンドを取り付けられない場合があります。)
- テレビ、ラジオなどのAV機器から離れた場所でご使用ください。  
雑音が入ることがあります。
- 使用中にテレビ、パソコンなどの画面を見たり本を読まないでください。  
気分が悪くなる場合があります。
- キャスター付椅子や回転椅子でのご使用は避けてください。  
電源コードに無理な力が加わり断線の恐れがあります。

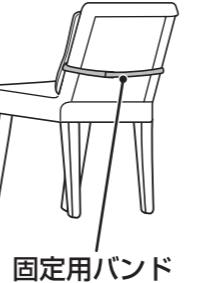

固定用バンド

### 2. ACアダプターのDCプラグを本体のジャックにしっかりと差し込み、 ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

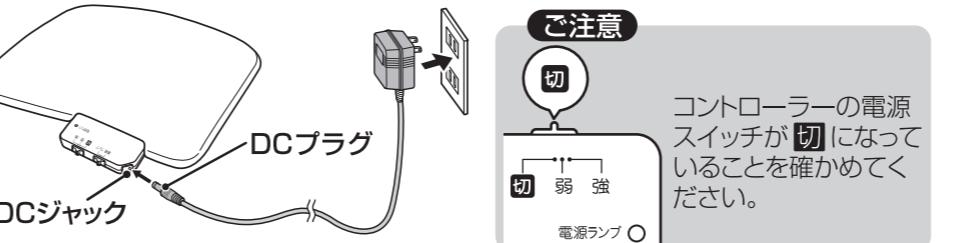


### 3. マッサージをします。

① 電源スイッチを「弱」  
にします。



電源ランプが点灯します。  
使いはじめは「弱」から  
ご使用ください。

② 機能スイッチを操作して、  
「連続」または「ウェーブ」を  
切換えます

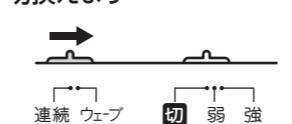

「ウェーブ」時は  
電源ランプが点滅します。

③ 電源スイッチを操作して、  
「弱」または「強」を選択  
します。




動作開始から約10分で  
自動的に停止します。  
(オートオフ機能)

### 4. 使い終わったら

① 電源スイッチを「切」  
にします。



② ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、  
本体のDCジャックからDCプラグをはずします。

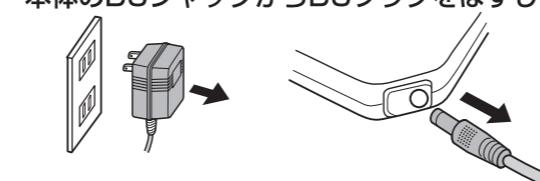

## マッサージの使用例


### 椅子での使用



### ベッドや布団での使用




腰に

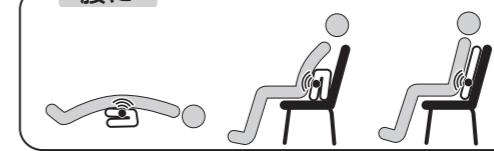

背中に



肩に

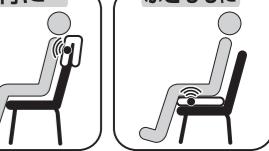

ふとももに



### ご注意とお願い

- 眠りながらのご使用は避けてください。体調不良やけがの原因になります。
- 椅子の形状によっては、バイブルーターが当たりにくい場合があります。  
その場合には、椅子と本体との間に厚手のタオル等をしいたり、本体の位置を動かして調整してください。

## こんなときは

こんなときは?	調べるところ	処置
動かない。	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。
	電源スイッチが「切」になっていませんか?	電源スイッチを「弱」または「強」にします。
	電源コードが傷んでいませんか?	ただちに使用を中止し、「お客様サービス係」まで修理をご依頼ください。
使用中に停止した。	スイッチを入れてから約10分経過していませんか?	オートオフタイマーによって自動停止しています。 再度、使用するときは、電源スイッチを入れ直してください。
破損してしまったり、一部のバイブルーターが動かない。		ただちに使用を中止し、「お客様サービス係」まで修理をご依頼ください。


# お手入れと保管

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをする恐れがあります。


- 水でうすめた食器用中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼって拭き、その後乾いた布で拭き取ります。  
※本体に水などが付着しないようにしてください。
- シンナー やベンジン、スプレー式クリーナー類は絶対に使用しないでください。
- 本体の洗濯はできません。
- 使用後は本体及び付属品の汚れやホコリを取り、湿気の少ないところに保管してください。

## カバーの洗濯のしかた


1. カバーのファスナーを開け、固定バンドをカバーの内側に引き込みます。

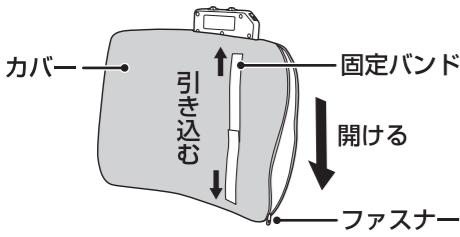

2. コントローラー部のカバーを引っ張り、コントローラーをカバーの内側に入れます。

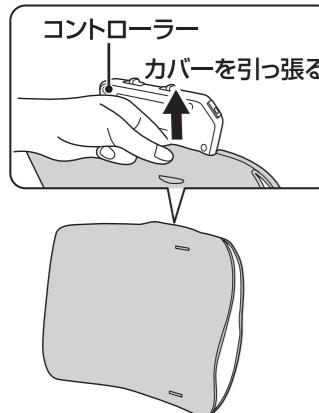

3. カバーを本体から取りはずします。

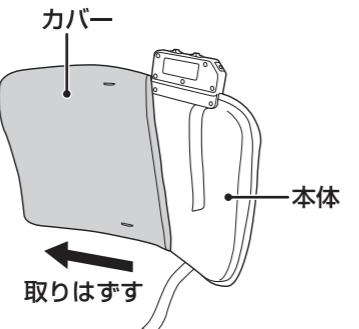


4. カバーに縫い付けてある洗濯表示に従い、カバーを洗濯します。

5. しわを伸ばして形を整えてから、日陰に干します。




## カバーの取付方法


1. 本体にカバーをかぶせます。

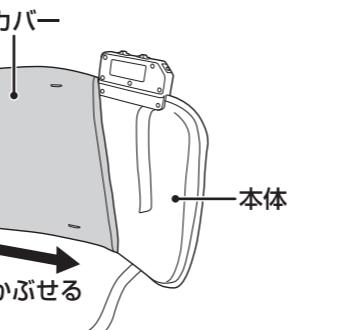

2. コントローラーと固定バンドをカバーの穴に通します。

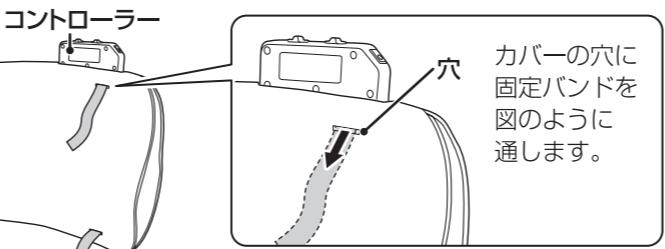

3. カバーのファスナーを閉じます。

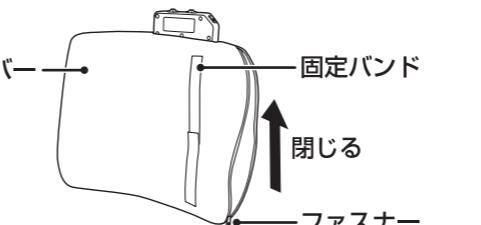

### ★長年ご使用の振動シートマッサージャーSの点検を！



#### 愛情点検

ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか。

●電気コードや電源プラグが異常に熱い。  
●コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。  
●いつもより異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。  
●製品に触れるビリビリと電気を感じる。  
●自動的に切れないときがある。  
●その他の異常・故障がある。

●故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

# アフターサービス

## 1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。  
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このシートマッサージャーSの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。

## 5. アフターサービスについてご不明の場合

お問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

### お客様サービス係

0120-337-455  
FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕様

販 售 名	シートマッサージャーS	
電 源	本 体	DC12V 150mA(専用ACアダプター EM-CH33型)
	ACアダプター	AC100V 50／60Hz
消費 電 力		3W
定 格 時 間		10分
タ イ マ ー		約10分
医 療 機 器 の 分 類		管理医療機器
類 別	機械器具(77)バイブレーター	
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード 34662000)	
医 療 機 器 認 証 番 号	220AGBZX00098000	
製 造 販 売 元	ツインバード工業株式会社 新潟県燕市吉田西太田2084-2	
製 造 業 者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION(中国)	
本 体 尺 法	約 幅450mm×奥行き50mm×高さ445mm	
本 体 質 量(重 量)	約730g(ACアダプター含む)	
コードの長さ(ACアダプター)	約2.5m	
本 体 外 被 材 料	ポリエチル	
内部クッション材質	ウレタンスピンド	

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。