

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。


またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用 添付文書
押しもみクッションマッサージャー
EM-2596
取扱説明書

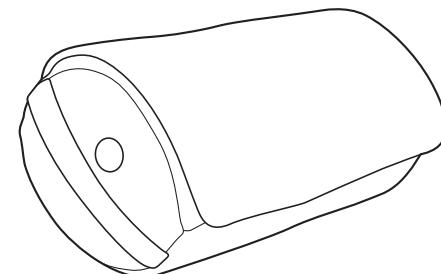

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

● もくじ	
安全上のご注意	1・2
使用目的、効能・効果	3
各部の名称とはたらき	
使いかた	4
マッサージの使用例	5
こんなときは	
お手入れ	6・7
アフターサービス	
仕様	8



RX1403B
2014年2月28日(新様式第2版)

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明 は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談の上ご使用ください。

強制

事故や体調不良をおこす恐れがあります。

- (1)ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み形医用電気機器を使用している人
- (2)悪性腫瘍のある人 (3)心臓に障害のある人 (4)温度感覚喪失が認められる人
- (5)生理中の人や妊娠中または出産直後の人は (6)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- (7)マッサージする部位の創傷や、疾患から生じるむくみや疼痛のある人
- (8)安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
- (9)病気などで熱の高い人 (38℃以上)
 - ・急性炎症症状【倦怠感、寒寒、血圧変動など】の強い時期・衰弱しているとき
- (10)骨粗鬆症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人
- (11)背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人 (12)高血圧と診断されている人
- (13)腱鞘炎の人 (14)上記以外に身体に特に異常を感じているとき



医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。

例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症【皮下組織の炎症を含む】など。

症状を悪化させる恐れがあります。



本製品をしばらく使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。



幼児や子供に使用させたり、本製品の上で遊ばせたり上に乗らせたりしないでください。
事故やけがの恐れがあります。



タバコをすいながらの使用はしないでください。

事故の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電やショート、発火、故障の原因になります。



風呂上がりやスポーツ直後など、身体が濡れた状態では、使用しないでください。
また、素肌では使用しないでください。

事故や故障の原因になります。



絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
発火・感電・けがの原因になります。
修理はお買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。



事故や故障の原因になります。



マッサージ以外の用途に使用しないでください。
事故やけがの恐れがあります。



自分で意思表示ができない人、または、自分で操作できない人への使用はおやめください。
体調不良を起こしたり、けがをする恐れがあります。



使用前に本体力バーの破れのないことを確認してください。
はすれた状態・破れた状態や内部構造が露出した状態では使用しないでください。



直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼してください。
けがや感電の原因になります。



付属の専用ACアダプター(EM-CH69型)を使用してください。



付属の専用ACアダプター以外を使用すると、火災や故障の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。



電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ストーブなどの熱いものの近くや、布団や電気毛布、コタツの中では使用しないでください。

火災や故障の原因になります。

注意



マッサージは1回10分以内にしてください。また、同一箇所への使用は5分以内にしてください。

長時間の使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になります。



頭、おなか、ひじ、ひざなどの関節部には使用しないでください。また、うつ伏せでの使用はしないでください。

事故やけがの原因になります。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。

感電やショート、発火の原因になります。



使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

守らないと事故や体調不良をおこす恐れがあります。



停電のときは直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

停電から復帰したときに事故やけがの恐れがあります。



使用後は、電源／モード切替スイッチを押して停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



お手入れの際は、本体を停止させ必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電やけがの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持つたず、必ずACアダプター本体を持つて引き抜いてください。また、DCプラグを抜くときは、電源コードを持つたず、必ずDCプラグ・DCジャックを持って引き抜いてください。

感電やショート、発火の原因になります。



本製品は、表面が温かくなります。熱に敏感でない人は、十分に注意を払ってご使用ください。

事故の原因になります。



電源プラグやDCプラグなど、全てのプラグ・コードは、容易に離脱しないよう、確実に最後まで差し込んでください。
感電、ショート、発火の原因になります。



スイッチやタイマーが正常に動作することを確かめてから使用してください。
けがの原因になります。



直射日光のあたる場所や、重いものをのせたまま放置しないでください。

色あせ、変形、劣化、故障の原因になります。



使用中に眠ったりしないでください。
また、飲酒後の使用はしないでください。
事故やけがの恐れがあります。



本体の上で飛びはねたり、立ちながらの使用はしないでください。

事故やけが、故障の原因になります。



動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。

感電や発火の原因になります。



テレビやラジオの付近では使用しないでください。
ノイズが入る場合があります。



浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。

また、水や湯をかけないでください。
感電や故障の原因になります。



お年寄りや虚弱体质の人が使用する場合、始めは使用時間を短くしてください。
体調不良の原因になります。



他の治療器と同時に使用しないでください。
体調不良の原因になります。



落としたり、踏んだり等の強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因になります。


お願い

- しばらく使用していなかった場合は、ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正常かつ安全に動作することを確認してください。
- 本体、付属品は、次回の使用に支障のないように清掃して湿気の少ないところに整理、保管してください。コード類はねじれをほどいて保管してください。
- 本製品を廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従ってください。

使用目的、効能・効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。
●疲労の回復 ●血行の促進 ●筋肉の疲れをとる
●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

各部の名称とはたらき

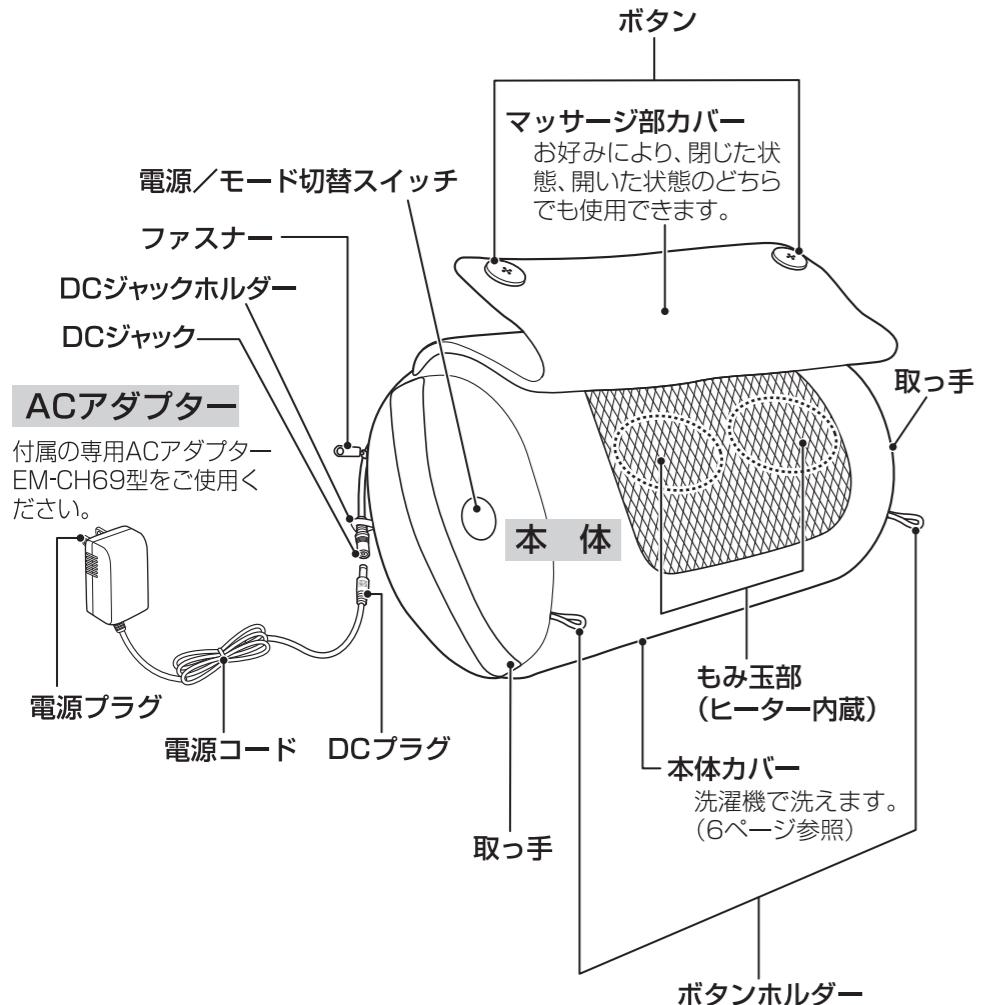


使いかた

1. 使用する場所を決めます。

本製品は車載用ではありません。車での使用はしないでください。
事故や故障の原因になります。


- 本体は安定した場所に設置してください。
- テレビ、ラジオなどのAV機器から離れた場所でご使用ください。
雑音が入ることがあります。
- 使用中にテレビ、パソコン等の画面を見たり本を読まないでください。
気分が悪くなる場合があります。
- キャスター付椅子や回転椅子でのご使用は避けてください。
電源コードに無理な力が加わり断線の恐れがあります。

2. ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックにしっかりと差し込み、ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

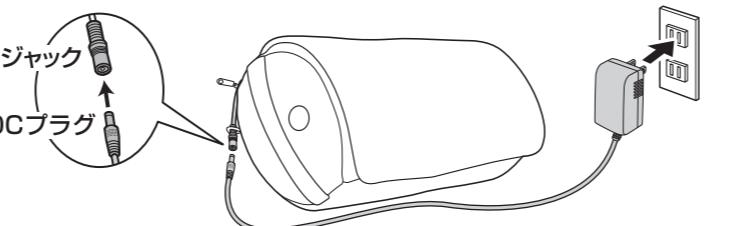

3. マッサージをします。

- ① 電源/モード切替スイッチを押し、動作モードを設定します。

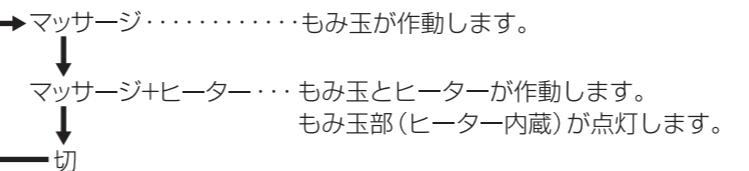

- ② 運転開始から約10分で自動的に停止します。(内蔵のオートオフタイマーによる。)

運転途中で停止したいときは、電源/モード切替スイッチを操作して運転を停止してください。

4. 使い終わったら

ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、本体のDCジャックからDCプラグをはずします。



マッサージの使用例



△注意とお願い
眠りながらのご使用は
避けてください。
体調不良やけがの原因に
なります。

こんなときは


こんなときは?	調べるところ	処置
動かない。	電源プラグ、DCプラグが抜けていませんか?	電源プラグ、DCプラグをしっかりと差し込みます。
	電源が「切」になっていませんか?	電源/モード切替スイッチを押し「マッサージ」または「マッサージ+ヒーター」モードに切り替えてください。
	電源コードが傷んでいませんか?	ただちに使用を中止し、「お客様サービス係」まで修理をご依頼ください。
	本体力バーの面ファスナーが正しい位置に貼り付けられていますか?	本体力バーの面ファスナーを正しい位置に貼り付け直し、再度動作を確認してください。
使用中に停止した。	スイッチを入れてから約10分経過していませんか?	オートオフタイマーによって、運転開始から約10分で自動的に停止します。
	押さえつけるなどして大きな負荷をかけていませんか?	事故防止のため、大きな負荷がかかると、安全装置が作動し、動作を停止します。
もみ玉部(ヒーター内蔵)が消灯した。 片側のモミ玉部のみ消灯した。	長時間の連続使用などで、もみ玉部が高温(約50℃以上)になっていますか?	もみ玉部の表面温度が約50℃を超えると、自動温度調節器が作動し、もみ玉部(ヒーター内蔵)が消灯します。自動温度調節器は、左右それぞれのモミ玉部に内蔵されています。片側のモミ玉部のみ消灯する場合があります。
本体力バーが破れて、内部が露出している。		ただちに使用を中止し、「お客様サービス係」まで修理をご依頼ください。

お手入れ


お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをする恐れがあります。

本体カバーの洗濯のしかた


1. DCジャックを、DCジャックホルダーからはずします。

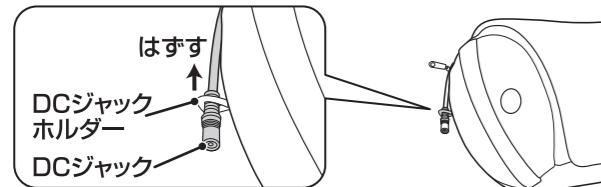

2. 本体カバーのファスナーを開けます。

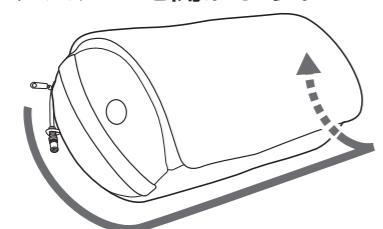

3. スイッチ部分裏面の面ファスナーをはがし、 本体カバーから本体を取り出します。

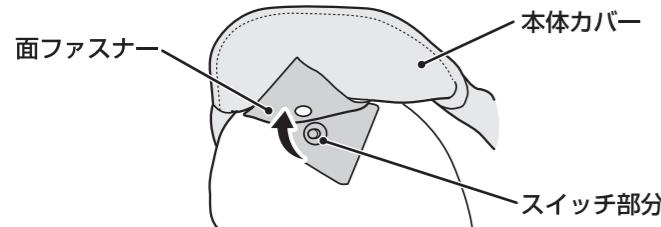


4. 本体カバーに縫い付けてある洗濯絵表示に従い、 本体カバーを洗濯します。




5. しわを伸ばして形を整えてから、日陰に干します。

本体カバーの取付方法


1. 本体に本体カバーをかぶせ、スイッチ部分の位置を合わせて 面ファスナーを貼り付けます。

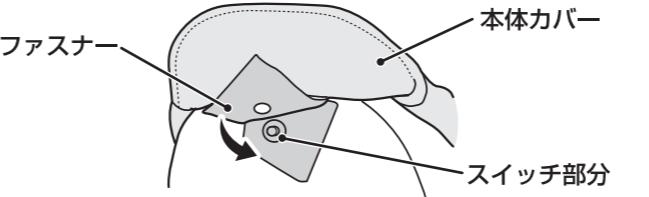

2. 本体カバーのファスナーを閉じます。

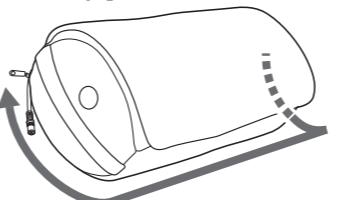

3. DCジャックを、DCジャックホルダーに通します。

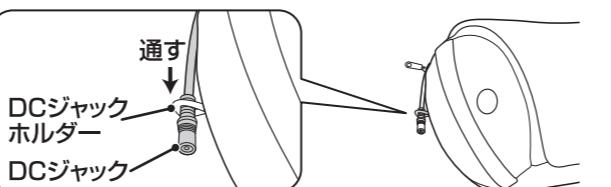

本体のお手入れ方法

水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、その後乾いた布でふきとってください。

▲注意


シンナーやベンジン、
スプレー式クリーナー類では
絶対ふかないでください。




愛情点検



★長年ご使用の押しモミクッションマッサージャーの点検を！

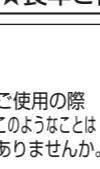

- 電気コードや電源プラグが異常に熱い。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないとがある。
- その他の異常・故障がある。

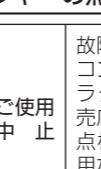

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- この押しモミクッションマッサージャーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合は