

防水超音波美顔器

SH-B783

取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

RX060GA



BeMainte
beauty maintenance

● も く じ

安全上のご注意	 1~4
各部の名称とはたらき	 5 6
使いかた	
充電のしかた	 7
肌のお手入れのしかた	 8 9
おすすめの使いかた・手順	... 10~12
使い終わったら	 13
ニッケル水素電池について	 14
製品廃棄のときは	 15
お手入れと保管	 16
別売品購入のご案内	 16
こんなときは	 17
アフターサービス	 18
仕 様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品はニッケル水素電池を使用していますので、製品及びニッケル水素電池をお取扱いになる際は十分ご注意ください。

内蔵のニッケル水素電池について

危険




火の中に投入したり加熱しないでください。



電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。




分解や改造をしないでください。

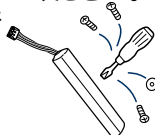

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。




⊕ ⊖ 端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。

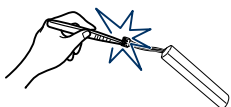

ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



5H・B783以外の機器に接続したり使用したりしないでください。

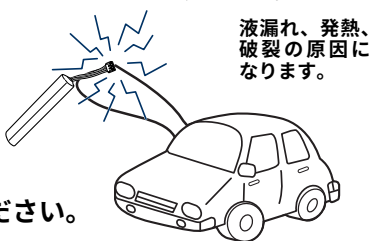

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



電池単独で充電しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

警告



水ぬれ禁止

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。



電池端子がさびびり発熱の原因になります。




外装チューブをはがしたりキズを付けたりしないでください。
電池がショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

注意



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

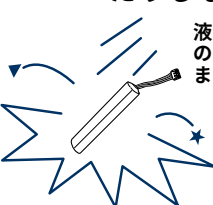

液漏れ、発熱の原因になります。

本体・充電台・ACアダプターについて

危険



強制

下記のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しないでください。

- (1)ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- (2)人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
- (3)心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。

警告



強制

次のような方は、使用を避けてください。

- (1)心臓疾患の人 (2)アトピー性皮膚炎の人 (3)急性疾患の人 (4)アレルギー体質の人 (5)有熱性疾患の人 (6)特に肌が敏感な人 (7)血圧異常の人 (8)血友病疾患の人 (9)感染性疾患の人 (10)ステロイド系ホルモン剤を長期使用している人 (11)結核性疾患の人 (12)肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 (13)悪性腫瘍の人 (14)飲酒や薬を服用中の人 (15)疲労の激しい人 (16)顔面神経痛の人 (17)化学繊維でカブレた経験のある人 (18)妊娠中の人 (19)過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき
- (20)生理中の人 (21)健康が特にすぐれない人



強制

下記の部位には使用しないでください。

- (1)整形手術をした部位 (2)顔・眼球・まぶた・耳・首 (3)指定部位以外 (4)傷口 (5)顔面黒皮症 (6)口の中等粘膜の部位 (7)ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位 (8)感覚、知覚障害を起こしている部位
- (9)顔に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
- (10)カウミヤホテリ、物理的刺激等による病的なシミのある部位
- (11)化粧品等で皮膚炎を起こしている部位

事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。



禁止

顔の美容目的以外には使用しないでください。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。



強制

一日に何度もくり返し使用したり、誤った使いかたをされると皮膚を傷めることがあります。



強制

ご使用中に気分が悪くなったり、皮膚に異常や痛みを感じた場合はすぐに使用を中止してください。



万一、皮膚に異常があらわれた時は、すぐに使用を中止し、専門の医師にご相談ください。



禁止

幼児や子供の手の届かない場所に保管し、幼児や子供には使用しないでください。

事故やトラブルの原因になります。



強制

本体の使用は 1日に 10分間、週 3回を限度としてください。
超音波によるお肌への刺激は回数が多すぎると逆にお肌への過剰な負担を与え、トラブルの原因になります。

警告



分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。本体内部に水が入り、故障の原因になります。



強制

使いはじめの方や敏感肌の方は使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながら使用してください。

守らないと事故やトラブルの恐れがあります。



禁止


本体使用時にプローブ面を肌の1ヶ所でとどめないでください。

守らないと事故やトラブルの恐れがあります。



水場での使用禁止

充電台・ACアダプターは水につけたり、浴室など湿気の高い場所での使用や保管をしないでください。

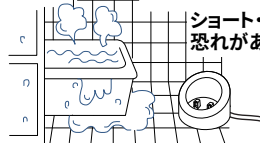

ショート・感電の恐れがあります。



強制

ACアダプターのプラグにほりこりが付着しないように、定期的に掃除してください。



付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



強制

使用前に専用ジェルの皮膚試験（パッチテスト）を行ってください。

「皮膚試験（パッチテスト）の手順」（6ページ）をご覧ください。万一、皮膚試験をした部位に異常がある場合は、使用を中止し、専門の医師にご相談ください。



強制

必ず専用ジェルを使用してください。

守らないと肌荒れなどトラブルの恐れがあります。



プラグを抜く


お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電やけがをすることがあります。



強制

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。また、ぬれた手では、さわらないでください。

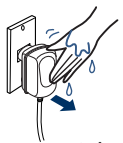


感電やショートして発火することがあります。



禁止

コードやACアダプタープラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないでください。

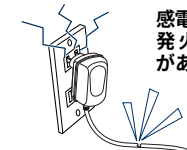

感電やショート・発火のおそれがあります。

警告



禁止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




重い物の下じき 結び目 破れ つぎたし



禁止

交流 100V以外では使用しないでください。

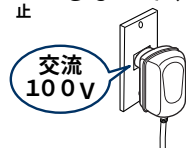

火災・感電の原因になります。



禁止

必ず専用のACアダプターを使用してください。



火災・感電の原因になります。

アダプターは専用

注意



禁止

本体、充電台、ACアダプターに強い衝撃を与えないでください。



強制

本体と充電台の充電ピンは、定期的に清掃してください。



本体充電ピン 充電台充電ピン



禁止

本体を通電したまま放置しないでください。事故やトラブルの恐れがあります。



禁止

充電台の上にコインやクリップなどの金属類を載せないでください。



禁止

水の中で使用しないでください。



故障の原因になります。




強制


脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用は避けてください。腫れたり、赤みが出る恐れがあります。

各部の名称とはたらき

キャップ

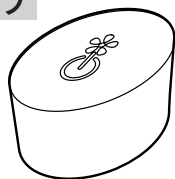

本体

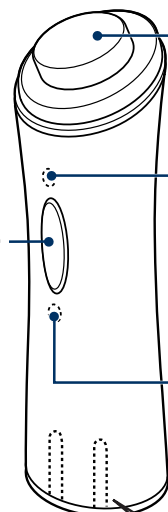

プローブ面

動作ランプ(緑のランプ)


スイッチをONすると「ピッ」とブザーがなり、緑のランプが点灯します。本体動作中は、秒に1回「ピッピッ」とブザーがなり、動作していることをお知らせします。本体は約10分でオートオフします。電池が少なくなると点滅し、オートオフします。この場合は本体の使用をやめ、本体を充電してください。

充電表示ランプ(赤のランプ)

本体を充電台に置くと、赤のランプが点灯します。充電が完了すると消灯します。(約2時間) 異常時には点滅します。「こんなときは」(17ページ)をご覧ください。

スイッチ

充電台

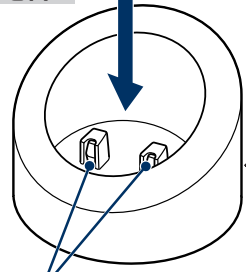


充電台充電ピン

本体充電ピン

DCジャック

ACアダプター

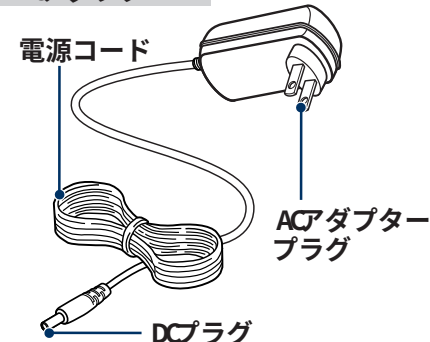

付属品



SH-AF50
ソニックケアジェル
(専用ジェル)
(1本で約2週間分です)

お求めの際は「別売品購入のご案内」
(16ページ)をご覧ください。

超音波発生の確認方法


1. プローブ面を水平にして、水を数滴たらしめます。
2. スwitchをONします。
3. プローブ面の水滴が振動していれば、超音波が発生しています。



動作ランプ点灯


押す スwitch

動作ランプが点灯します。

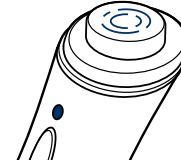

皮膚試験(パッチテスト)の手順

皮膚試験(パッチテスト)は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

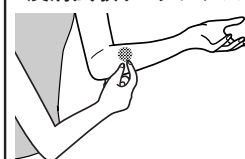


- ① 腕の内側を石けんで洗い、タオル等でふきとります。
- ② 洗ったところに専用ジェルを塗り、48時間放置します。
10円玉硬貨大にうすく塗り自然乾燥させます。
- ③ 異常のないことを確認します。
48時間経過しても異常があらわれなければ、皮膚試験は合格です。本製品をご使用ください。

注意

- 皮膚試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしないでください。
- 塗布部に発疹・発赤 かゆみ 刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流してください。
- パッチテストの結果、異常があった場合は、使用をやめてください。
専門の医師にご相談ください。

使いかた 充電のしかた

- 購入後、初めて使用するときや、半年以上放置したときは、必ず充電してからお使いください。
- 満充電した状態で 1回 10分で約 2回ご使用になれます。
- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。

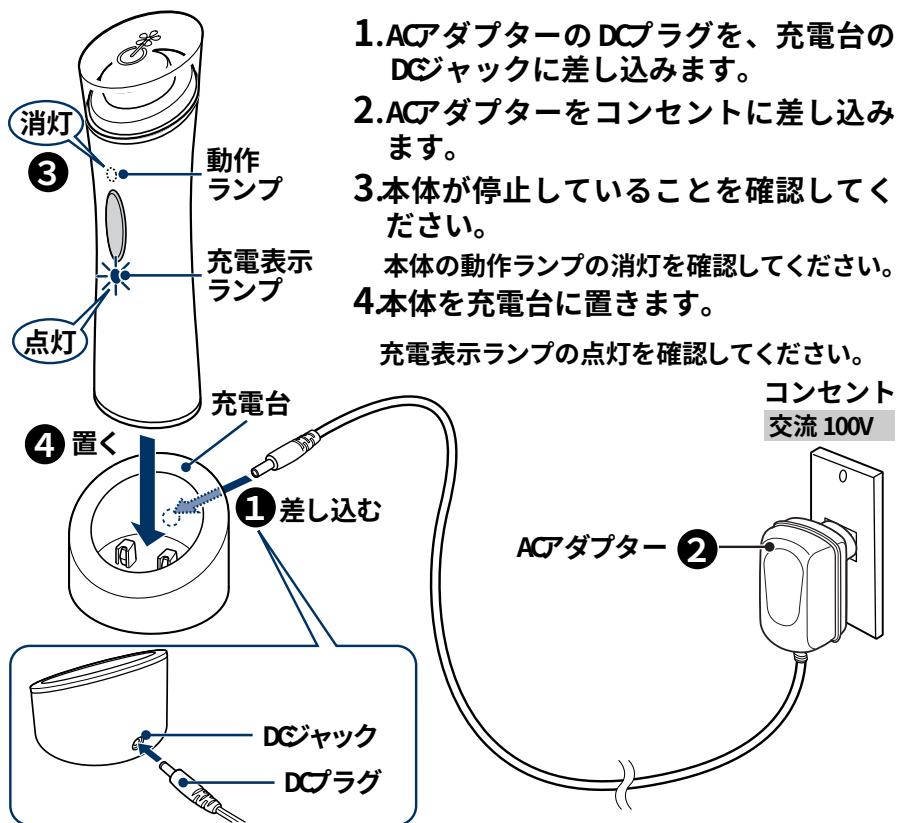

お願い

- 購入後、初めて使用するときや半年以上放置したときは、約 2時間で充電が完了しない場合があります。
- 充電台は水平で安定した所に置いてください。
- 充電中、本体とACアダプターが少し温くなりますが、異常ではありません。
- 充電は周囲温度 0℃～40℃の環境でおこなってください。
(それ以外の周囲温度では充電できません。)
- 充電中に充電表示ランプが点滅して充電できないときは、電池の寿命が考えられます。当社「お客様サービス係」(18ページ)までご連絡ください。


肌のお手入れのしかた

1. クレンジング・洗顔をします。



乾燥が気になる場合は洗顔後、お手持ちの化粧水で肌を整えていただからお使いいただいても結構です。
また乳液やクリーム、美容液などの油性化粧品を使用すると、超音波が伝わりにくくなりますので使わないでください。

2. 本体のキャップをはずします。

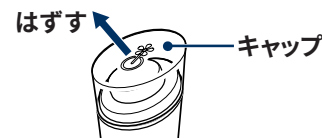

3. 付属の専用ジェルを顔のポイントにつけます。




専用ジェル(50円玉大)を手にとって顔の4ヶ所に置いて軽く伸ばしてください。
専用ジェルの量が減ってきたときは、専用ジェルを追加しながら、お使いください。

△ 注意

- 必ず付属の専用ジェルをお使いください。
専用ジェルがないと超音波は伝わりません。
- 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。そのときは使用をやめて数日間様子を見て、症状が消えてから使用してください。
- 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れたときは使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 使用前に皮膚試験(パッチテスト)を行なって、肌に影響がないかを確認してください。(6ページをご覧ください。)

4. スイッチを押して電源を入れます。

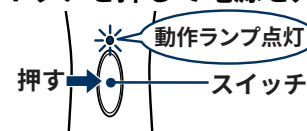

5. お手入れ開始。(11ページ・12ページをご覧ください。)



使い始めの方やお肌の敏感な方は使用時間を短くしてお肌の様子を見ながらお使いください。
プローブを肌に密着させ、顔の中心線から外側に、下から上にゆっくりすべらせてください。
肌の上をすべらせたら往復せず、必ず一度プローブを肌からはなしてください。
「プローブ面の動かし方」(9ページ)をご覧ください。

6.ジェルを伸ばしながら肌にプローブ面を密着させ、軽く押さえながらすべさせます。

警告



額・眼球まぶた・耳・首に使用しないでください。
肌・身体トラブルの恐れがあります。
//////の部分には使用しない。


注意

- 専用ジェルがない状態で使わないでください。
- 本体使用時にプローブ面を1ヶ所でもとめないでください。

お願い

- 10分経過すると、オートオフします。
- 本体の動作中は、約5秒ごとに「ピッピッ」とアラーム音が鳴り、動作していることをお知らせします。
- 使用中、本体が多少温かくなりますが、異常ではありません。


プローブ面の動かし方

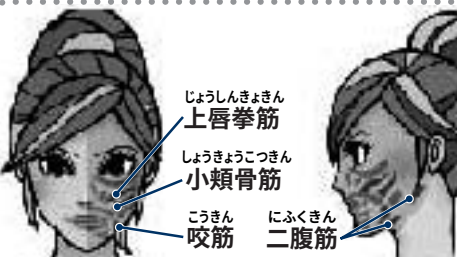



顔面の筋肉は左図のようになっています。
この筋肉上にってプローブ面をすべさせます。
肌にプローブ面を密着させてください。
密着しないと超音波が肌に伝わりません。

- プローブ面を動かすスピードの目安としては…アゴから耳下までを約5秒かけて動かします。

- 1.下から上へ移動させます。
- 2.上まで行ったらいったん、肌からはずします。
- 3.再び下から上へ移動させます。

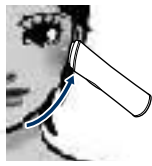

ゆっくりすべらせるように、
プローブ面に肌をのせて、
押し上げるようにします。

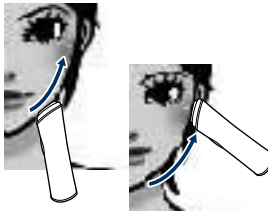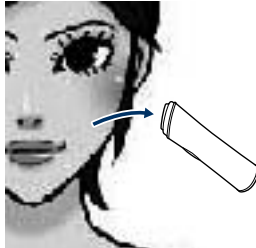

左右対称にくり返します。

おすすめの使いかた・手順

＜おすすめ＞

基本コース 8分

重点ケアコース 2分

- 顔全体を美顔します。

- 気になる部分を重点的に美顔します。

基本コース

- ① 1～6までを1セットとして左右交互に行ないます。
- ② イラストのラインにそって下から上へすべさせます。
上まで行ったら、いったん肌からはずして再び下から上へくり返してください。
- ③ 使用時間の目安として、片側で約4分間です。

注意

ほお骨や小鼻のところはプローブ面が浮きやすくなりますので、
肌にプローブ面を密着させてください。

- 1.アゴの下からフェイスラインにそって耳下までプローブ面をすべさせます。



目安として下から上へ5秒かけて
移動させます。
これを約8回行ないます。

- 2.アゴから耳の手前までプローブ面をすべさせます。




目安として下から上へ5秒かけて
移動させます。
これを約8回行ないます。

- 3.口元からこめかみまでプローブ面をすべさせます。



目安として下から上へ5秒かけて
移動させます。
これを約8回行ないます。

4.鼻下からこめかみにプローブ面をすべさせます。

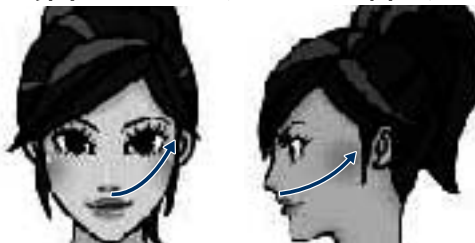


目安として下から上へ 5秒かけて移動させます。
これを約 8回行ないます。

5.口元から小鼻の横にプローブ面をすべさせます。



目安として下から上へ 5秒かけて移動させます。
これを約 8回行ないます。

6.鼻横からほお骨にプローブ面をすべさせます。

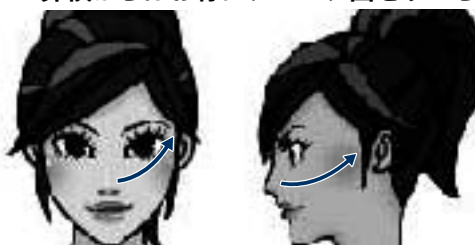

目安として下から上へ 5秒かけて移動させます。
これを約 8回行ないます。

警告



下記の部位には使用しないでください。

- (1)整形手術をした部位 (2)額・眼球・まぶた・耳・首 (3)指定部位以外 (4)傷口 (5)顔面黒皮症 (6)口の中や粘膜の部位 (7)ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位 (8)感覚、知覚傷害を起こしている部位 (9)顔に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位 (10)カユミやホテリ、物理的刺激等による病的なシミのある部位 (11)化粧品等で皮膚炎を起こしている部位
- 事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

重点ケアコース

各矢印の手順を約 5秒間かけて、行ないます。


「ほほ」を上げる

1 2 3 4 5 6口元からほお骨まで持ち上げるようにプローブをすべさせます。



「口元」を上げる

1 2 3 4 5 6口元を下から鼻横へ持ち上げるようにプローブをすべさせます。

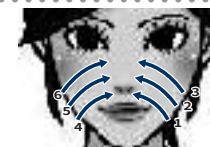

「アゴ」をすっきりさせる

1 2 3アゴから口元へ 4 5アゴから耳下へ下から上へ引っ張り上げるようにプローブをすべさせます。




プローブ面をすべさせる始めのところと終わりのところでは少し力を入れて矢印の方向に押し上げると効果的です。

注意

- 超音波美顔器のプローブ面は、1秒に500万回の振動をしています。お肌が振動するとお肌が刺激され、フェイスラインが引き締まります。
 - 顔以外（手やボディ）には使用しないでください。1秒間に500万回の超音波振動は肌の奥には届きません。
 - 使用時は必ず付属の専用ジェルを塗布してください。
 - 専用のジェル以外の化粧品では超音波は伝わりません。また、他のジェルと超音波美顔器を使った場合、化粧品成分が肌に強い刺激を与えることがありますので避けてください。
 - ジェルは超音波をお肌に伝えるためのものです。プローブ面とお肌の間に空気があると超音波が伝わりません。
 - 本体の使用は1日に10分間、週3回を限度としてください。超音波によるお肌への刺激は回数が多すぎると逆にお肌へ過剰な負担を与え、トラブルの原因になります。
 - 本体使用後の肌のお手入れは、普段ご使用のものを、使用後のお肌の状態（しっとり度合いなど）に合わせてご使用ください。
- 使用後は、お肌が活性化して、いわゆる興奮状態にあります。化粧品で落ち着かせてあげることをおすすめします。

使い終わったら

1. 本体を停止させます。

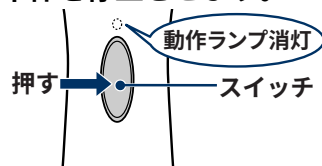


動作ランプの消灯を確認ください。

2. プロブ面についたジェルをティッシュ等でふき取ります。



汚れがひどい場合は
水洗いしてください。

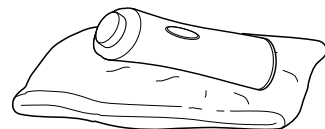

水洗い後、乾いたタオルの上で水気を取って
ください。

陰干しで十分乾かしてから、本体を充電器に差し込みます。

△注意

ヘアードライヤーや乾燥器など熱風で乾かさないでください。

3. 肌に残ったジェルを洗い落とします。



4. 使用後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補います。

普段、お使いのものをご使用ください。

!注意



強制

本体充電ピンの汚れは、乾いた布や綿棒
などでよくふき取ってください。



保管

- 幼児や子供の手の届かないところで保管してください。
- 浴室など湿気の多いところや、水中に放置しないでください。
- 温度の高いところや、直射日光の当たるところには置かないでください。



ニッケル水素電池について

ニッケル水素電池は消耗品ですので保証適用外となります。

- 内蔵のニッケル水素電池は、約 500 回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。
- 約 2 時間充電しても 1〜2 分程度で動かなくなるようなときや、充電台に本体をのせた時に充電表示ランプが点滅するようなときはニッケル水素電池の寿命が考えられます。新しい電池との交換をおすすめいたします。
ニッケル水素電池の交換（有料）につきましては当社「お客様サービス係」（18 ページ）までご連絡の上、製品をお送りください。
本製品はニッケル水素電池内蔵の防水仕様製品です。
安全にご使用いただくためにも製品を当社へご送付いただいてニッケル水素電池交換（有料）を依頼してください。
お客様ご自身での交換はしないでください。防水機能に影響がでる恐れがあります。

—「お客様サービス係」へ製品をご送付いただく場合—

製品が輸送中に損傷しないように、なるべくご購入いただいたときのパッケージ（箱／緩衝材）をご利用ください。


製品廃棄のときは

この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合は、ニッケル水素電池を取り出して協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。


ニッケル水素電池の取り出し方

ニッケル水素電池を使い切ってからおこなってください。


- ① スイッチが「off」になっていることを確認します。

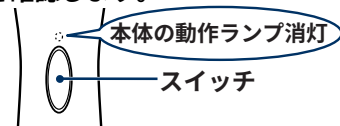


- ② 本体底部のネジをはずします。

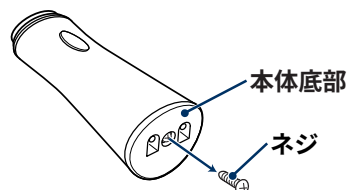

- ③ 本体底部を本体グリップ部から取りはずします。

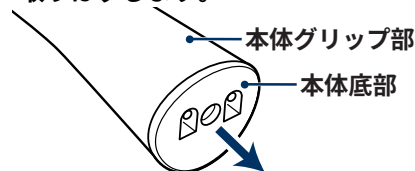


- ④ 本体グリップ部から本体フレーム部を引き抜きます。

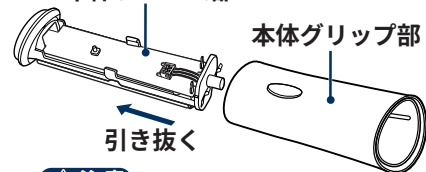


△注意

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。故障の原因になります。

- ⑤ ニッケル水素電池のコネクターを基板からはずします。

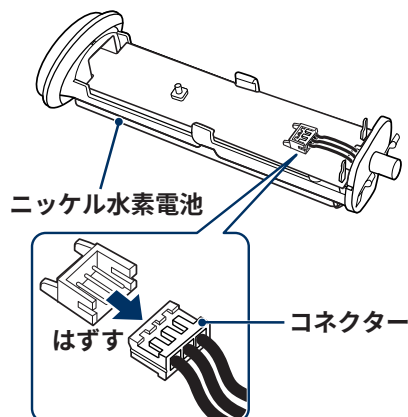

- ⑥ 本体フレーム部からニッケル水素電池を取り出します。

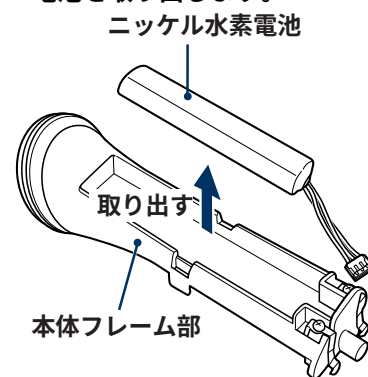

お手入れと保管


本 体

1



プローブ面のジェルをふき取ります。

2

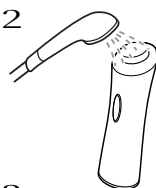

汚れがひどい場合は水洗いします。

△注意

45℃以上のお湯で洗わないでください。

3



水洗い後、乾いたタオルの上で水気を取ってください。

△警告

- 充電台・ACアダプターの水洗いはしないでください。
- ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。
- お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがのおそれがあります。
- ACアダプターのプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をしてください。付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



- 本体や充電台外観の汚れは台所用洗剤をうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとってください。
- シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。


充 電 台



汚れを布でふきとります。



6ヶ月に一度は、ACアダプターのプラグの金属部の間をからぶきします。

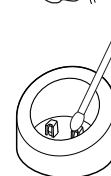

充電台充電ピンの汚れは乾いた布や綿棒などでよくふき取ってください。

別売品購入のご案内

別売品として以下のものをご用意しています。ご希望の方は、直接「お客様サービス係」(18ページ)までお問い合わせください。

製品番号	製品名	価 格
SH-AF50	ビメンテソニックケアジェル 2本	5,250円(本体価格 5,000円)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株) 「お客様サービス係」

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

こんなときは

こんなときは	調 べ る と こ ろ	処 置
スイッチをONにしても動かない。	本体は充電されていますか？	本体を充電してください。→7ページ
本体動作中に「ジジジ」と音がする。	超音波振動子の動いている音です。異常ではありません。	
本体を動かしているときに動作ランプが点滅している。	電池の容量が少なくなっています。本体を充電してください。	→7ページ
充電できない。充電台に本体を置いて充電表示ランプが点灯しない。	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。→7ページ
	本体と充電台の充電ピンが汚れていませんか？	充電ピンの汚れを乾いた布や綿棒などでふき取ってください。→16ページ
	本体は正しく充電台に置かれていますか？充電ピン同士が正しく接触していますか？	本体充電ピンと充電台充電ピンが接触するように本体を正しく充電台に置いてください。本体を傾いた状態で置かないでください。
約2時間たっても充電が完了しない。	本体を使用した直後に充電しましたか？	本体を使用した直後は電池の温度が高くなっていることがあります。本製品は電池の温度が下がってから充電が開始されます。そのため、充電完了まで2時間以上経過したと思われます。異常ではありません。
約2時間たっても充電表示ランプが消灯しない。	周囲温度は0～40℃ですか？	周囲温度が0℃～40℃の環境で充電してください。
	購入してから初めての充電ですか？使わないまま半年以上放置してからの充電ですか？	電池の電圧が極度に低下している場合があります。そのため、充電時間が長くなる場合があります。
充電中に充電表示ランプが点滅している。	本体は正しく充電台に置かれていますか？	正しく置いても充電表示ランプが点滅している場合は、電池の寿命が考えられます。当社「お客様サービス係」にご相談ください。→18ページ
本体動作中に充電表示ランプが点滅している。	本体内部の安全装置が働いています。本体内部の異状が考えられます。当社「お客様サービス係」にご相談ください。	→18ページ
使用時間が短くなった。	再度充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。当社「お客様サービス係」にご相談ください。	→18ページ

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- この防水超音波美顔器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜) 午前時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

本 体

電 源 方 式	充電式
充 電 時 間	約2時間
使 用 電 池	ニッケル水素電池
使 用 時 間	約20分/10分のオートオフタイマー付(目安として 回10分で約 回)

充電台・ACアダプター

定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 容 量	18VA
コ ー ド 長 (約)	1.0m

製 品 寸 法 (約)	本 体	幅: 49×奥行: 46×高さ: 165mm
	充電台セット状態	幅: 70×奥行: 70×高さ: 180mm
使 用 温 度 範 囲	0℃～40℃	
セ ッ ト 内 容	本体…1、キャップ…1 充電台…1 ACアダプター…1 専用ジェル…1	